


- Date :** 18/04/2019
- Produit :** Déambulateur léger Ligero
- Identification des produits concernés :** Produits avec les références 322NPU (hauteur d'assise : 56 cm) et 323NPU (hauteur d'assise : 52 cm), respectivement avec les numéros de série 346V XXXXXX, date de production : de 2014 à 2018 incluse
- Expéditeurs/contacts :** DIETZ GmbH Reha-Produkte
Reutäckstraße 12
76307 Karlsbad
Service clientèle : Jürgen Ketschek, tél. : +49 7248-9186 65
Chargé de sécurité : Maximilian Raab, tél. : +49 7248 -9186 33
- Destinataire :** Revendeurs spécialisés en produits de santé et établissements ayant acheté les produits correspondants.
- Description du problème et cause :** Lorsque les poignées de manœuvre sont entièrement déployées et en cas d'utilisation sur un sol inégal, les risques suivants existent :
- Risque de basculement du déambulateur vers l'arrière
 - Risque de basculement du déambulateur sur le côté
 - Risque de rupture du cadre supérieur du déambulateur (à hauteur de l'extrémité inférieure de la poignée de manœuvre non déployée)
- La principale cause de ces risques est le réglage de la longueur des poignées de manœuvre.
- Mesures à prendre :** Pour chaque côté, la longueur d'extension maximale des poignées de manœuvre doit être limitée à la deuxième position la plus haute (position 5). La position la plus haute (position 6) ne doit en aucun cas être utilisée :

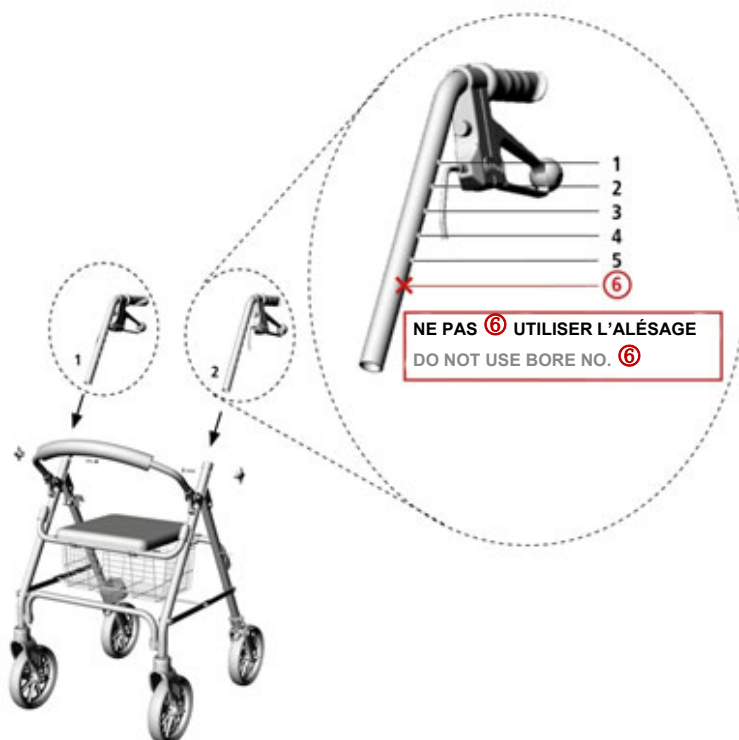

Cette restriction minimise la tendance du déambulateur à basculer vers l'arrière, ainsi que le risque de rupture du cadre supérieur.

Sur la position 5, les poignées de manœuvre sont à une hauteur de 865 mm. En règle générale, le réglage des poignées de manœuvre sur la position 5 est suffisant pour les personnes d'une taille d'au moins 175 cm.

Si toutefois la hauteur des poignées de manœuvre ne convient pas aux besoins individuels et ne suffit pas avec ce réglage, veuillez vous adresser à l'expéditeur, afin de procéder à l'échange des poignées de manœuvre.

Nous souhaitons en outre vous informer que nous avons complété le mode d'emploi en y ajoutant des instructions de maintenance et d'entretien, ainsi que des consignes de sécurité. Nous estimons la durée de vie de nos déambulateurs à 5 ans, dans la mesure où ils sont utilisés conformément à nos consignes d'entretien et de sécurité. De plus, il est impératif de respecter la consigne suivante déjà présente dans la première version du mode d'emploi : **« Le déambulateur Ligerio doit exclusivement être utilisé sur un sol stable et plan ».**

Vous trouverez le mode d'emploi dans sa version actuelle sur Internet sous le lien suivant : **bit.ly/bda_ligerio**

Veuillez vous assurer que vos collaborateurs et clients prennent bien connaissance de cette information de sécurité de priorité urgente.

Les clients ayant obtenu les produits correspondants de notre part seront informés séparément par nos soins.

Veuillez conserver cette information de sécurité au moins jusqu'à ce que la mesure ait été entièrement accomplie.

Maximilian Raab
Directeur &
chargé de sécurité