



Genève, le 6 octobre 2021  
FSCA 5333

**Transmettre à toute personne concernée dans le laboratoire  
IMPORTANT, AVIS GLOBAL DE SÉCURITÉ– CORRECTION DU PRODUIT  
Multiples références d'immunoessais VIDAS®  
Erreur Substrat – Retard de résultats potentiel**

**Réponse requise**

Chère Cliente, Cher Client,

Ce courrier a pour objet de vous communiquer des informations importantes concernant les produits d'immunoessais cliniques VIDAS® dont les références figurent dans le Tableau 1 ci-dessous. Votre laboratoire a reçu un/plusieurs des références produits et lots de réactifs immunoessais cliniques VIDAS® suivants.

**Description de l'anomalie :**

Depuis juillet 2021, bioMérieux a reçu un nombre croissant de réclamations liées à une « Erreur Substrat » VIDAS®. Elle empêche l'exécution du test, ce qui entraîne un retard potentiel des résultats car un autre test doit être réalisé.


Une mesure du signal du bruit de fond (RFU) est effectuée par le système VIDAS® avant de lancer la réaction. Une limite acceptable est définie lors de la conception du produit pour chaque référence de produits finis.

Trois valeurs existent comme limite acceptable selon le test : 300, 350 et 500 RFU.

Le substrat est présent dans le dernier puits de la cartouche pour tous les immunoessais VIDAS® et permet la fluorescence lorsqu'il est dégradé par l'enzyme (phosphatase alcaline - PAL).

---

bioMérieux (Suisse) SA

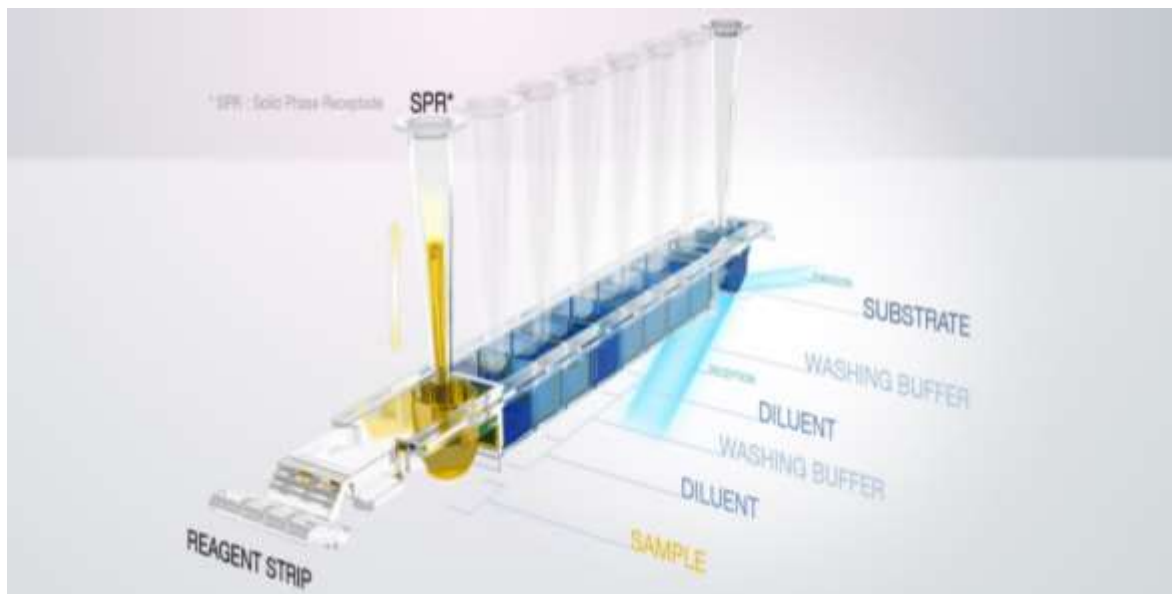

Le niveau de fluorescence est ensuite corrélé avec les résultats pour tous les tests.

Lorsque vous effectuez un test, si la RFU est supérieure à la limite acceptable, un message d'erreur est affiché par le système : « Erreur Substrat ».

Le test est arrêté et cette alarme empêche le système de fournir tout résultat si la valeur RFU est supérieure au seuil défini lors du développement du produit.

Cette alarme étant présente sur tous les systèmes de la famille VIDAS®, elle garantit **qu'aucun faux résultat** ne peut être rendu en cas de dégradation du substrat.

**Ceci signifie qu'il y a uniquement un risque de délai sur le rendu des résultats.**

Des investigations ont immédiatement été initiées pour identifier la cause racine, ce qui suit a été identifié :

- Tous les lots impactés d'immunoessais VIDAS® étaient conformes aux spécifications lors de leur libération.
- L'anomalie « erreur substrat » a été confirmée sur tous les lots d'immunoessais VIDAS® fabriqués avec des lots de substrat utilisant un lot commun de matière première (4-MUP). Celui-ci a été identifié comme la cause commune la plus probable.
- L'étendue de l'anomalie a été identifiée sur tous les lots d'immunoessais VIDAS® fabriqués depuis février 2021 utilisant des lots de substrats fabriqués avec le lot concerné de matière première.
- L'anomalie est due à une dégradation accélérée du substrat, qui suit un modèle linéaire au cours du temps conduisant à ce que les limites acceptables RFU soient atteintes avant la fin de la durée de conservation déterminée du produit.
- Des analyses d'évolution cinétique ont été réalisées en mesurant la valeur RFU du substrat d'un nombre statistiquement représentatif de lots conservés d'immunoessais VIDAS® (fabriqués avec le substrat contenant la matière première concernée) à différentes durées de conservation.



- Ce modèle nous a permis de prédire les tendances de dégradation du substrat utilisant le lot concerné de 4MUP et donc de réviser la date de péremption de chaque lot de produits finis d'immunoessais VIDAS® impactés.
- Lorsqu'il est utilisé jusqu'à la date de péremption révisée, le produit continue de fonctionner conformément à ses spécifications de performances enregistrées.
- Par conséquent, une action corrective impliquant une révision de la date de péremption de tous les lots de produits d'immunoessais cliniques VIDAS® (listés dans le Tableau 1 ci-dessous) est nécessaire pour garantir que les produits spécifiés continueront à fonctionner conformément aux spécifications de performances revendiquées.

Nous comprenons que ce sujet complexe crée un désagrément important. Nous vous remercions pour votre coopération qui est essentielle pour assurer la mise en œuvre réussie de cette action corrective, afin de protéger la sécurité de nos patients.

Nous sommes en train de retravailler certains lots d'immunoessais VIDAS® en stock en appliquant un sticker avec la date de péremption révisée sur le dessus des kits. Toutefois, pour assurer la continuité du service, il se peut que vous receviez, pendant une courte période, des lots d'immunoessais cliniques VIDAS® sans sticker. Tous ces lots font l'objet de cet avis de correction et sont détaillés dans les différents tableaux qui suivent ce courrier.

#### **Impact client / patient :**

En cas d'erreur substrat, il existe un potentiel retard de résultats. Il n'y a aucun risque de faux résultats.

#### **Actions requises :**

Veillez déterminer les références produits que vous avez actuellement en stock et qui sont référencées dans le Tableau 1, et mettre en œuvre les actions définies dans les tableaux correspondants.

- **Produits non périmés (en prenant en compte la date de péremption révisée) dans le Tableau 1:**
  - Identifier les produits répertoriés selon le Tableau 1,
  - Mettre à jour la date de péremption du produit conformément à vos procédures internes pour respecter la nouvelle date de péremption révisée spécifiée dans le Tableau 1.
  - Continuer l'utilisation du produit jusqu'à la date de péremption révisée.
- Veuillez contacter votre représentant bioMérieux local pour commander les produits de remplacement appropriés lorsqu'ils sont périmés après la date de péremption révisée.
- **Pour les produits périmés : (en prenant en compte la date de péremption révisée) :**
  - Pour les produits périmés : (en prenant en compte la date de péremption révisée), veuillez détruire les lots restants dans votre inventaire et contacter votre représentant bioMérieux local afin de recevoir une note de crédit et commander les produits de remplacement.
- Nous vous rappelons de conserver les références VIDAS® à 2-8°C comme décrit dans la notice d'utilisation du produit.



- Diffuser cette information aux personnels concernés de votre laboratoire, conserver une copie dans vos dossiers et communiquer ces informations à tous les utilisateurs de ce produit, incluant ceux à qui vous l'auriez transféré.
- Veuillez retourner les pages 1 **et** 2 de l'accusé de réception complété (Annexe A) par email [ch\\_support@biomerieux.com](mailto:ch_support@biomerieux.com) ou par fax au 022 906 57 42.

bioMérieux s'engage à fournir des produits et services de qualité à ses clients. Aussi, nous vous prions de bien vouloir nous excuser des inconvénients que cette situation pourrait engendrer dans l'organisation de votre laboratoire.

Notre Service Client Scientifique se tient à votre disposition pour tout complément d'information au :  
**☎ : 022 906 57 96**

Nous vous remercions pour votre confiance et vous prions d'agréer, Chère Cliente, Cher Client, l'expression de nos salutations respectueuses.

bioMérieux (Suisse) SA

A handwritten signature in blue ink that reads "Sabrina Wulf".

Sabrina Wulf  
Product Manager Immunoassays

**PJ** : Accusé de réception du courrier (Annexe A)

**Tableau 1: Liste des références produits d'immunoessais cliniques VIDAS® impactées :**

Référence Produit	Nom du produit	Tableaux
30118	VIDAS® C. difficile Toxin A & B	Voir tableau 2
30125	VIDAS® C. difficile GDH	Voir tableau 3
30211	VIDAS® TOXO Competition	Voir tableau 4
30308	VIDAS® Anti-HCV	Voir tableau 5
30314	VIDAS® Anti-HBc Total II	Voir tableau 6
30315	VIDAS® HBs Ag Ultra	Voir tableau 7
30318	VIDAS® Anti-HBs Total II	Voir tableau 8
30405	VIDAS® HCG	Voir tableau 9
30409	VIDAS® Progesterone	Voir tableau 10
30421	VIDAS® CK-MB	Voir tableau 11
30439	VIDAS® HBc IgM II	Voir tableau 12
30443	VIDAS® HIV DUO Ultra	Voir tableau 13
30446	VIDAS® Myoglobin	Voir tableau 14
30447	VIDAS® HIV DUO Quick	Voir tableau 15
30450	VIDAS® B•R•A•H•M•S PCT™	Voir tableau 16
30455-02	VIDAS® D-Dimer Exclusion II™	Voir tableau 17
30458	VIDAS® NT-proBNP2	Voir tableau 18
30603	VIDAS® Digoxin	Voir tableau 19
415386	VIDAS® High sensitive Troponin I	Voir tableau 20
418115	VIDAS® Anti-HEV IgM	Voir tableau 21
421172-03	VIDAS® NEPHROCHECK®	Voir tableau 22
423077	VIDAS® DENGUE NS1 Ag	Voir tableau 23
423078	VIDAS® Anti-DENGUE IgM	Voir tableau 24

**Annexe A: ACCUSÉ DE RÉCEPTION: (Page 1)**

**URGENT: AVIS DE SÉCURITÉ**

**FSCA 5333 - Multiples références d'immunoessais VIDAS®**

**Erreur Substrat – Retard de résultats potentiel**



Conformément aux exigences réglementaires de traçabilité, nous vous remercions de bien vouloir compléter ce formulaire, même si vous ne disposez plus du réactif. **Veillez retourner les pages 1 et 2 de l'accusé de réception complété, par email [ch\\_support@biomerieux.com](mailto:ch_support@biomerieux.com) ou par fax au 022 906 57 42.**

Raison sociale / Tampon  
du laboratoire :

Personne de contact :

CP, Ville :

Numéro de client :

<p align="center">Veillez remplir le tableau comme suit :</p> <p align="center">- Cochez les références des produits que vous avez commandés dans le champ correspondant.</p> <p align="center">- Si vous avez été informé d'un impact sur les résultats patients, veuillez saisir un « O » dans le champ de la référence concernée.</p>	VIDAS® C. difficile Toxin A & B	30118
	VIDAS® C. difficile GDH	30125
	VIDAS® TOXO Compétition	30211
	VIDAS® Anti-HCV	30308
	VIDAS® Anti-HBc Total II	30314
	VIDAS® HBs Ag Ultra	30315
	VIDAS® Anti-HBs Total II	30318
	VIDAS® HCG	30405
	VIDAS® Progesterone	30409
	VIDAS® CK-MB	30421
	VIDAS® HBc IgM II	30439
	VIDAS® HIV DUO Ultra	30443
	VIDAS® Myoglobin	30446
	VIDAS® HIV DUO Quick	30447
VIDAS® B•R•A•H•M•S PCT™	30450	
VIDAS® D-Dimer Exclusion II™	30455-02	
VIDAS® NT-proBNP2	30458	
VIDAS® Digoxin	30603	
VIDAS® High sensitive Troponin I	415386	
VIDAS® Anti-HEV IgM	418115	
VIDAS® NEPHROCHECK®	421172-03	
VIDAS® DENGUE NS1 Ag	423077	
VIDAS® Anti-DENGUE IgM	423078	
<p>J'accuse réception du courrier bioMérieux « <b>Multiples références d'immunoessais VIDAS® - Erreur Substrat - Retard de résultats potentiel</b> »</p>		
<p>Je mettrai en œuvre les actions requises concernant les lots VIDAS® concernés comme indiqué dans l'Avis urgent de sécurité du produit.</p>		
<p>Avez-vous été informé d'un impact sur les résultats patients ou de conséquences / événements indésirables pour le patient en lien avec l'anomalie identifiée dans ce courrier?</p>		

bioMérieux (Suisse) SA



## Annexe A : ACCUSÉ DE RÉCEPTION : (Page 2)

Pour les produits périmés, nous vous demandons de saisir le nombre de coffret(s) détruit(s) dans le tableau suivant.

REF	Lot #	Nom du produit	Nombre de coffret(s) détruit(s)
30443	1008675340	VIDAS HIV DUO ULTRA 60 TESTS	
30447	1008592410	VIDAS HIV DUO QUICK 60 TESTS	
30447	1008680850	VIDAS HIV DUO QUICK 60 TESTS	
30450	1008591130	VIDAS BRAHMS PROCALCITONIN 60T	
30450	1008633310	VIDAS BRAHMS PROCALCITONIN 60T	
30450	1008641870	VIDAS BRAHMS PROCALCITONIN 60T	
30458	1008693930	VIDAS NT-PROBNP 2 60 TESTS	
415386	1008694760	VIDAS HIGH SENSITIVE TROPONIN I 60 TESTS	
415386	1008727610	VIDAS HIGH SENSITIVE TROPONIN I 60 TESTS	
415386	1008666230	VIDAS HIGH SENSITIVE TROPONIN I 60 TESTS	
415386	1008576310	VIDAS HIGH SENSITIVE TROPONIN I 60 TESTS	
415386	1008677520	VIDAS HIGH SENSITIVE TROPONIN I 60 TESTS	

**Veillez retourner les pages 1 et 2 de l'accusé de réception complété,  
par email [ch\\_support@biomerieux.com](mailto:ch_support@biomerieux.com) ou par fax au 022 906 57 42.**

DATE .....

SIGNATURE.....

bioMérieux (Suisse) SA

**Tableau 2 : Produits non périmés (en prenant en compte la date de péremption révisée)**

REF	Lot #	Nom du produit	Date de péremption actuelle	Date de péremption révisée
30118	1008731010	VIDAS CD A.B 60 TESTS	09-Apr-2022	10-Mar-2022
30118	1008926680	VIDAS CD A.B 60 TESTS	08-Jul-2022	01-Jun-2022

**Tableau 3 : Produits non périmés (en prenant en compte la date de péremption révisée)**

REF	Lot #	Nom du produit	Date de péremption actuelle	Date de péremption révisée
30125	1008597480	VIDAS GDH 60 TESTS	18-Apr-2022	25-Jan-2022
30125	1008686700	VIDAS GDH 60 TESTS	06-Jun-2022	03-Mar-2022
30125	1008859220	VIDAS GDH 60 TESTS	03-Sep-2022	13-Jun-2022

**Tableau 4 : Produits non périmés (en prenant en compte la date de péremption révisée)**

REF	Lot #	Nom du produit	Date de péremption actuelle	Date de péremption révisée
30211	1008615860	VIDAS TOXO COMPETITION 60 TESTS	24-Feb-2022	09-Feb-2022
30211	1008864170	VIDAS TOXO COMPETITION 60 TESTS	28-Jun-2022	08-Jun-2022

**Tableau 5 : Produits non périmés (en prenant en compte la date de péremption révisée)**

REF	Lot #	Nom du produit	Date de péremption actuelle	Date de péremption révisée
30308	1008624280	VIDAS ANTI-HCV 60 TESTS	30-May-2022	26-Jan-2022
30308	1008837640	VIDAS ANTI-HCV 60 TESTS	14-Sep-2022	26-May-2022
30308	1008722870	VIDAS ANTI-HCV 60 TESTS	20-Jul-2022	25-Mar-2022
30308	1008808970	VIDAS ANTI-HCV 60 TESTS	09-Sep-2022	17-May-2022
30308	1008857200	VIDAS ANTI-HCV 60 TESTS	01-Oct-2022	16-Jun-2022
30308	1008860610	VIDAS ANTI-HCV 60 TESTS	01-Oct-2022	16-Jun-2022

**Tableau 6 : Produits non périmés (en prenant en compte la date de péremption révisée)**

REF	Lot #	Nom du produit	Date de péremption actuelle	Date de péremption révisée
30314	1008654830	VIDAS ANTI-HBC TOTAL II 60 TESTS	11-Mar-2022	23-Feb-2022

**Tableau 7 : Produits non périmés (en prenant en compte la date de péremption révisée)**

REF	Lot #	Nom du produit	Date de péremption actuelle	Date de péremption révisée
30315	1008612250	VIDAS HBS AG ULTRA 60 TESTS	26-Mar-2022	25-Jan-2022
30315	1008614380	VIDAS HBS AG ULTRA 60 TESTS	26-Mar-2022	25-Jan-2022
30315	1008642570	VIDAS HBS AG ULTRA 60 TESTS	22-Apr-2022	23-Feb-2022
30315	1008735620	VIDAS HBS AG ULTRA 60 TESTS	26-May-2022	07-Apr-2022
30315	1008790310	VIDAS HBS AG ULTRA 60 TESTS	05-Jul-2022	17-May-2022
30315	1008790410	VIDAS HBS AG ULTRA 60 TESTS	05-Jul-2022	17-May-2022
30315	1008861610	VIDAS HBS AG ULTRA 60 TESTS	06-Aug-2022	16-Jun-2022

**Tableau 8 : Produits non périmés (en prenant en compte la date de péremption révisée)**

REF	Lot #	Nom du produit	Date de péremption actuelle	Date de péremption révisée
30318	1008719940	VIDAS ANTI HBS TOTAL II 60T	29-Jul-2022	30-Nov-2021
30318	1008830740	VIDAS ANTI HBS TOTAL II 60T	07-Oct-2022	18-Jan-2022
30318	1008865350	VIDAS ANTI HBS TOTAL II 60T	03-Nov-2022	06-Feb-2022

**Tableau 9 : Produits non périmés (en prenant en compte la date de péremption révisée)**

REF	Lot #	Nom du produit	Date de péremption actuelle	Date de péremption révisée
30405	1008714630	VIDAS HCG 60 TESTS	26-Apr-2022	27-Nov-2021
30405	1008747680	VIDAS HCG 60 TESTS	11-May-2022	27-Nov-2021
30405	1008757640	VIDAS HCG 60 TESTS	18-May-2022	19-Dec-2021
30405	1008784120	VIDAS HCG 60 TESTS	03-Jun-2022	01-Jan-2022
30405	1008796930	VIDAS HCG 60 TESTS	02-Jun-2022	09-Jan-2022
30405	1008808600	VIDAS HCG 60 TESTS	14-Jun-2022	09-Jan-2022
30405	1008824160	VIDAS HCG 60 TESTS	17-Jun-2022	25-Jan-2022
30405	1008827550	VIDAS HCG 60 TESTS	16-Jun-2022	25-Jan-2022
30405	1008849560	VIDAS HCG 60 TESTS	01-Jul-2022	05-Feb-2022
30405	1008861770	VIDAS HCG 60 TESTS	08-Jul-2022	05-Feb-2022
30405	1008881760	VIDAS HCG 60 TESTS	15-Jul-2022	15-Feb-2022
30405	1008920140	VIDAS HCG 60 TESTS	06-Aug-2022	27-Feb-2022
30405	1008924590	VIDAS HCG 60 TESTS	05-Aug-2022	22-Mar-2022
30405	1008926200	VIDAS HCG 60 TESTS	18-Aug-2022	22-Mar-2022

**Tableau 10 : Produits non périmés (en prenant en compte la date de péremption révisée)**

REF	Lot #	Nom du produit	Date de péremption actuelle	Date de péremption révisée
30409	1008615920	VIDAS PROGESTERONE 60 TESTS	02-Mar-2022	03-Feb-2022
30409	1008685480	VIDAS PROGESTERONE 60 TESTS	20-May-2022	07-Apr-2022
30409	1008686900	VIDAS PROGESTERONE 60 TESTS	13-Apr-2022	22-Mar-2022
30409	1008730710	VIDAS PROGESTERONE 60 TESTS	29-Apr-2022	04-Apr-2022
30409	1008775650	VIDAS PROGESTERONE 60 TESTS	28-May-2022	09-May-2022
30409	1008816010	VIDAS PROGESTERONE 60 TESTS	10-Jun-2022	09-May-2022
30409	1008816030	VIDAS PROGESTERONE 60 TESTS	10-Jun-2022	09-May-2022
30409	1008873190	VIDAS PROGESTERONE 60 TESTS	08-Jul-2022	23-Jun-2022
30409	1008911230	VIDAS PROGESTERONE 60 TESTS	06-Aug-2022	05-Jul-2022

**Tableau 11 : Produits non périmés (en prenant en compte la date de péremption révisée)**

REF	Lot #	Nom du produit	Date de péremption actuelle	Date de péremption révisée
30421	1008557760	VIDAS CK MB 30 TESTS	21-Jan-2022	12-Jan-2022
30421	1008934620	VIDAS CK MB 30 TESTS	15-Jul-2022	29-Jun-2022

**Tableau 12 : Produits non périmés (en prenant en compte la date de péremption révisée)**

REF	Lot #	Nom du produit	Date de péremption actuelle	Date de péremption révisée
30439	1008636760	VIDAS HBC IGM II 30 TESTS	12-Mar-2022	23-Feb-2022
30439	1008888750	VIDAS HBC IGM II 30 TESTS	29-Jun-2022	08-Jun-2022

**Tableau 13 : Produits non périmés et périmés (en prenant en compte la date de péremption révisée)**

**Tableau 13 a : Produits périmés (en prenant en compte la date de péremption révisée)**

REF	Lot #	Nom du produit	Date de péremption actuelle	Date de péremption révisée
30443	1008675340	VIDAS HIV DUO ULTRA 60 TESTS	30-Mar-2022	13-Sep-2021

**Tableau 13b : Produits non périmés (en prenant en compte la date de péremption révisée)**

REF	Lot #	Nom du produit	Date de péremption actuelle	Date de péremption révisée
30443	1008745740	VIDAS HIV DUO ULTRA 60 TESTS	27-Apr-2022	18-Oct-2021
30443	1008829020	VIDAS HIV DUO ULTRA 60 TESTS	29-Jun-2022	19-Dec-2021
30443	1008834410	VIDAS HIV DUO ULTRA 60 TESTS	21-Jun-2022	06-Dec-2021

**Tableau 14 : Produits non périmés (en prenant en compte la date de péremption révisée)**

REF	Lot #	Nom du produit	Date de péremption actuelle	Date de péremption révisée
30446	1008658660	VIDAS MYOGLOBIN 30 TESTS	23-Mar-2022	26-Oct-2021
30446	1008708120	VIDAS MYOGLOBIN 30 TESTS	22-Apr-2022	14-Nov-2021
30446	1008802100	VIDAS MYOGLOBIN 30 TESTS	08-Jun-2022	01-Jan-2022
30446	1008813810	VIDAS MYOGLOBIN 30 TESTS	08-Jun-2022	01-Jan-2022

**Tableau 15 : Produits non périmés et périmés (en prenant en compte la date de péremption révisée)**

**Tableau 15a : Produits périmés (en prenant en compte la date de péremption révisée)**

REF	Lot #	Nom du produit	Date de péremption actuelle	Date de péremption révisée
30447	1008592410	VIDAS HIV DUO QUICK 60 TESTS	31-Jan-2022	07-Aug-2021
30447	1008680850	VIDAS HIV DUO QUICK 60 TESTS	11-Apr-2022	02-Oct-2021

**Tableau 15b : Produits non périmés (en prenant en compte la date de péremption révisée)**

REF	Lot #	Nom du produit	Date de péremption actuelle	Date de péremption révisée
30447	1008802860	VIDAS HIV DUO QUICK 60 TESTS	13-Jun-2022	27-Nov-2021

**Tableau 16 : Produits non périmés et périmés (en prenant en compte la date de péremption révisée)**

**Tableau 16a : Produits périmés (en prenant en compte la date de péremption révisée)**

REF	Lot #	Nom du produit	Date de péremption actuelle	Date de péremption révisée
30450	1008591130	VIDAS BRAHMS PROCALCITONIN 60T	15-Aug-2022	20-Sep-2021
30450	1008633310	VIDAS BRAHMS PROCALCITONIN 60T	08-Sep-2022	28-Sep-2021
30450	1008641870	VIDAS BRAHMS PROCALCITONIN 60T	08-Sep-2022	28-Sep-2021

**Tableau 16b : Produits non périmés (en prenant en compte la date de péremption révisée)**

REF	Lot #	Nom du produit	Date de péremption actuelle	Date de péremption révisée
30450	1008661450	VIDAS BRAHMS PROCALCITONIN 60T	21-Sep-2022	26-Oct-2021
30450	1008722440	VIDAS BRAHMS PROCALCITONIN 60T	27-Oct-2022	30-Nov-2021
30450	1008741790	VIDAS BRAHMS PROCALCITONIN 60T	07-Nov-2022	30-Nov-2021
30450	1008769030	VIDAS BRAHMS PROCALCITONIN 60T	24-Nov-2022	31-Dec-2021
30450	1008796890	VIDAS BRAHMS PROCALCITONIN 60T	11-Dec-2022	31-Dec-2021
30450	1008784200	VIDAS BRAHMS PROCALCITONIN 60T	30-Nov-2022	09-Jan-2022
30450	1008817120	VIDAS BRAHMS PROCALCITONIN 60T	15-Dec-2022	24-Jan-2022
30450	1008886330	VIDAS BRAHMS PROCALCITONIN 60T	18-Jan-2023	08-Feb-2022
30450	1008926040	VIDAS BRAHMS PROCALCITONIN 60T	08-Feb-2023	21-Mar-2022

**Tableau 17 : Produits non périmés (en prenant en compte la date de péremption révisée)**

REF	Lot #	Nom du produit	Date de péremption actuelle	Date de péremption révisée
30455-02	1008656010	VIDAS D-DIMER EXCLUSION II 60T	23-Mar-2022	03-Mar-2022
30455-02	1008696080	VIDAS D-DIMER EXCLUSION II 60T	13-Apr-2022	22-Mar-2022
30455-02	1008705690	VIDAS D-DIMER EXCLUSION II 60T	18-Apr-2022	07-Apr-2022
30455-02	1008589420	VIDAS D-DIMER EXCLUSION II 60T	16-Feb-2022	26-Jan-2022
30455-02	1008592150	VIDAS D-DIMER EXCLUSION II 60T	23-Feb-2022	03-Feb-2022
30455-02	1008609020	VIDAS D-DIMER EXCLUSION II 60T	26-Feb-2022	03-Feb-2022
30455-02	1008720080	VIDAS D-DIMER EXCLUSION II 60T	18-Apr-2022	07-Apr-2022
30455-02	1008732940	VIDAS D-DIMER EXCLUSION II 60T	04-May-2022	19-Apr-2022
30455-02	1008744900	VIDAS D-DIMER EXCLUSION II 60T	07-May-2022	19-Apr-2022
30455-02	1008756000	VIDAS D-DIMER EXCLUSION II 60T	17-May-2022	04-May-2022
30455-02	1008761030	VIDAS D-DIMER EXCLUSION II 60T	22-May-2022	28-Apr-2022
30455-02	1008762030	VIDAS D-DIMER EXCLUSION II 60T	25-May-2022	28-Apr-2022
30455-02	1008763980	VIDAS D-DIMER EXCLUSION II 60T	24-May-2022	04-May-2022
30455-02	1008771100	VIDAS D-DIMER EXCLUSION II 60T	31-May-2022	04-May-2022
30455-02	1008778230	VIDAS D-DIMER EXCLUSION II 60T	30-May-2022	28-Apr-2022
30455-02	1008781240	VIDAS D-DIMER EXCLUSION II 60T	03-Jun-2022	08-May-2022
30455-02	1008815220	VIDAS D-DIMER EXCLUSION II 60T	14-Jun-2022	27-May-2022
30455-02	1008815240	VIDAS D-DIMER EXCLUSION II 60T	13-Jun-2022	17-May-2022
30455-02	1008864310	VIDAS D-DIMER EXCLUSION II 60T	15-Jul-2022	16-Jun-2022
30455-02	1008891770	VIDAS D-DIMER EXCLUSION II 60T	27-Jul-2022	29-Jun-2022
30455-02	1008917580	VIDAS D-DIMER EXCLUSION II 60T	17-Aug-2022	27-Jul-2022
30455-02	1008918050	VIDAS D-DIMER EXCLUSION II 60T	31-May-2022	04-May-2022
30455-02	1008918060	VIDAS D-DIMER EXCLUSION II 60T	03-Jun-2022	08-May-2022

**Tableau 18 : Produits non périmés et périmés (en prenant en compte la date de péremption révisée)**

**Tableau 18a : Produits périmés (en prenant en compte la date de péremption révisée)**

REF	Lot #	Nom du produit	Date de péremption actuelle	Date de péremption révisée
30458	1008693930	VIDAS NT-PROBNP 2 60 TESTS	15-Apr-2022	13-Sep-2021

**Tableau 18b : Produits non périmés (en prenant en compte la date de péremption révisée)**

REF	Lot #	Nom du produit	Date de péremption actuelle	Date de péremption révisée
30458	1008747590	VIDAS NT-PROBNP 2 60 TESTS	04-May-2022	11-Oct-2021
30458	1008776240	VIDAS NT-PROBNP 2 60 TESTS	01-Jun-2022	26-Oct-2021
30458	1008838180	VIDAS NT-PROBNP 2 60 TESTS	30-Jun-2022	17-Nov-2021
30458	1008851520	VIDAS NT-PROBNP 2 60 TESTS	30-Jun-2022	17-Nov-2021
30458	1008886400	VIDAS NT-PROBNP 2 60 TESTS	20-Jul-2022	22-Dec-2021
30458	1008894100	VIDAS NT-PROBNP 2 60 TESTS	27-Jul-2022	04-Jan-2022
30458	1008894140	VIDAS NT-PROBNP 2 60 TESTS	27-Jul-2022	04-Jan-2022

**Tableau 19 : Produits non périmés (en prenant en compte la date de péremption révisée)**

REF	Lot #	Nom du produit	Date de péremption actuelle	Date de péremption révisée
30603	1008824700	VIDAS DIGOXIN - DIG 60 TESTS	22-Jun-2022	27-May-2022

**Tableau 20 : Produits non périmés et périmés (en prenant en compte la date de péremption révisée)**

**Tableau 20a : Produits périmés (en prenant en compte la date de péremption révisée)**

REF	Lot #	Nom du produit	Date de péremption actuelle	Date de péremption révisée
415386	1008694760	VIDAS HIGH SENSITIVE TROPONIN I 60 TESTS	06-Jul-2022	13-Sep-2021
415386	1008727610	VIDAS HIGH SENSITIVE TROPONIN I 60 TESTS	29-Jul-2022	29-Sep-2021
415386	1008666230	VIDAS HIGH SENSITIVE TROPONIN I 60 TESTS	19-Jun-2022	25-Aug-2021
415386	1008576310	VIDAS HIGH SENSITIVE TROPONIN I 60 TESTS	08-May-2022	06-Jul-2021
415386	1008677520	VIDAS HIGH SENSITIVE TROPONIN I 60 TESTS	01-Jul-2022	25-Aug-2021

**Tableau 20b : Produits non périmés (en prenant en compte la date de péremption révisée)**

REF	Lot #	Nom du produit	Date de péremption actuelle	Date de péremption révisée
415386	1008752990	VIDAS HIGH SENSITIVE TROPONIN I 60 TESTS	11-Aug-2022	11-Oct-2021
415386	1008768930	VIDAS HIGH SENSITIVE TROPONIN I 60 TESTS	24-Aug-2022	26-Oct-2021
415386	1008768940	VIDAS HIGH SENSITIVE TROPONIN I 60 TESTS	21-Aug-2022	30-Oct-2021
415386	1008801930	VIDAS HIGH SENSITIVE TROPONIN I 60 TESTS	02-Sep-2022	08-Nov-2021
415386	1008809020	VIDAS HIGH SENSITIVE TROPONIN I 60 TESTS	10-Sep-2022	08-Nov-2021
415386	1008827440	VIDAS HIGH SENSITIVE TROPONIN I 60 TESTS	17-Sep-2022	18-Nov-2021
415386	1008829290	VIDAS HIGH SENSITIVE TROPONIN I 60 TESTS	16-Sep-2022	08-Nov-2021
415386	1008843450	VIDAS HIGH SENSITIVE TROPONIN I 60 TESTS	23-Sep-2022	18-Nov-2021
415386	1008848240	VIDAS HIGH SENSITIVE TROPONIN I 60 TESTS	30-Sep-2022	30-Nov-2021
415386	1008848270	VIDAS HIGH SENSITIVE TROPONIN I 60 TESTS	30-Sep-2022	30-Nov-2021
415386	1008867160	VIDAS HIGH SENSITIVE TROPONIN I 60 TESTS	09-Oct-2022	12-Dec-2021
415386	1008867170	VIDAS HIGH SENSITIVE TROPONIN I 60 TESTS	09-Oct-2022	12-Dec-2021

REF	Lot #	Nom du produit	Date de péremption actuelle	Date de péremption révisée
415386	1008872350	VIDAS HIGH SENSITIVE TROPONIN I 60 TESTS	08-Oct-2022	08-Dec-2021
415386	1008882110	VIDAS HIGH SENSITIVE TROPONIN I 60 TESTS	15-Oct-2022	06-Dec-2021
415386	1008886390	VIDAS HIGH SENSITIVE TROPONIN I 60 TESTS	19-Oct-2022	06-Dec-2021
415386	1008890790	VIDAS HIGH SENSITIVE TROPONIN I 60 TESTS	18-Oct-2022	08-Dec-2021
415386	1008893760	VIDAS HIGH SENSITIVE TROPONIN I 60 TESTS	26-Oct-2022	22-Dec-2021
415386	1008901930	VIDAS HIGH SENSITIVE TROPONIN I 60 TESTS	28-Oct-2022	22-Dec-2021
415386	1008903780	VIDAS HIGH SENSITIVE TROPONIN I 60 TESTS	29-Oct-2022	04-Jan-2022
415386	1008912850	VIDAS HIGH SENSITIVE TROPONIN I 60 TESTS	04-Nov-2022	04-Jan-2022

**Tableau 21 : Produits non périmés (en prenant en compte la date de péremption révisée)**

REF	Lot #	Nom du produit	Date de péremption actuelle	Date de péremption révisée
418115	1008652560	VIDAS HEV IGM 30T	19-Sep-2022	23-Feb-2022
418115	1008776540	VIDAS HEV IGM 30T	28-Nov-2022	28-Apr-2022
418115	1008868900	VIDAS HEV IGM 30T	16-Jan-2023	14-Jun-2022

**Tableau 22 : Produits non périmés (en prenant en compte la date de péremption révisée)**

REF	Lot #	Nom du produit	Date de péremption actuelle	Date de péremption révisée
421172-03	1008838860	VIDAS NEPHROCHECK 30 TESTS	22-Sep-2022	26-May-2022

**Tableau 23 : Produits non périmés (en prenant en compte la date de péremption révisée)**

REF	Lot #	Nom du produit	Date de péremption actuelle	Date de péremption révisée
423077	1008731920	VIDAS DENGUE NS1 AG 60T	26-Oct-2022	07-Apr-2022
423077	1008785470	VIDAS DENGUE NS1 AG 60T	29-Nov-2022	08-May-2022
423077	1008899350	VIDAS DENGUE NS1 AG 60T	03-Jan-2023	08-Jun-2022

**Tableau 24 : Produits non périmés (en prenant en compte la date de péremption révisée)**

REF	Lot #	Nom du produit	Date de péremption actuelle	Date de péremption révisée
423078	1008730620	VIDAS ANTI DENGUE IGM 60T	17-Oct-2022	07-Apr-2022
423078	1008781310	VIDAS ANTI DENGUE IGM 60T	27-Nov-2022	28-Apr-2022
423078	1008921610	VIDAS ANTI DENGUE IGM 60T	29-Jan-2023	30-Jun-2022