

## Medtronic (Schweiz) AG

Talstrasse 9  
3053 Münchenbuchse  
www.medtronic.com

Tel. 031 868 01 00  
Fax 031 868 01 99  
E-Mail [swisscontact@medtronic.com](mailto:swisscontact@medtronic.com)

Ligne d'assistance téléphonique: 0800 633 333

## Information Urgente de sécurité Pompe à insuline MiniMed™ série 600 et 700 Capuchon de la Pile Notification

Pompe à insuline	Modèle
MiniMed™ 640G Insulin Pump	MMT-1711, MMT-1712, MMT-1751, MMT-1752
MiniMed™ 670G Insulin Pump	MMT-1761, MMT-1762, MMT-1781, MMT-1782
MiniMed™ 720G Insulin Pump	MMT-1809, MMT-1810, MMT-1859, MMT-1860
MiniMed™ 740G Insulin Pump	MMT-1811, MMT-1812, MMT-1861, MMT-1862
MiniMed™ 770G Insulin Pump	MMT-1881, MMT-1882, MMT-1891, MMT-1892
MiniMed™ 780G Insulin Pump	MMT, 1885, MMT-1886, MMT-1895, MMT-1896

Mai 2022

Référence Medtronic: FA1249

Chère Patiente, Cher Patient,

Vous recevez cette information car vous avez reçu une pompe à insuline de modèle MiniMed™ 640G ou MiniMed™ 780G. Nous souhaitons vous informer d'un problème potentiel lié au capuchon de la pile de votre pompe et vous indiquer les mesures à prendre. Veuillez lire attentivement les informations ci-dessous.

### **DESCRIPTION DU PROBLÈME**


Le capuchon de la pile de la pompe se compose d'un capuchon en plastique et d'un contact métallique qui fonctionnent ensemble avec la pile AA pour alimenter la pompe. Le contact métallique doit être maintenu en place par trois points en plastique noir, rond et en relief, comme illustré ci-dessous. Si le contact métallique se détache ou tombe du capuchon de la pile, la connexion de la pile peut être incomplète et la pompe ne sera pas alimentée. Lorsque la pompe ne détecte aucune source d'alimentation, une alarme "Insérer pile" se déclenche et **l'administration d'insuline s'arrête immédiatement**. Après 10 minutes, le son de l'alarme peut augmenter jusqu'à devenir une sirène, puis **la pompe s'éteint**.



Le capuchon de pile se trouve sur le dessus de la pompe, là où se trouve le compartiment de la pile AA.



Capuchon de pile non endommagé –  
Continuez à l'utiliser  
Possède trois points en plastique noir, rond et en relief,  
qui maintiennent le contact métallique en place.

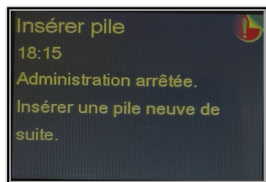

Exemple de l'alarme "Insérer pile".



Capuchons de piles endommagés – A ne pas utiliser  
Contact métallique manquant, un ou plus des 3 points en relief manquant

Si la pompe arrête l'administration d'insuline en raison d'une perte d'alimentation, cela pourrait entraîner à divers degrés des hyperglycémies, y compris l'acidocétose diabétique. Des effets indésirables graves ont été signalés lors de l'utilisation des pompes à insuline des séries MiniMed™ 640G ou MiniMed™ 780G, pouvant être attribués au capuchon pile endommagé. Bien qu'un examen effectué par des experts cliniques indépendants n'attribue pas entièrement et directement ce fait, il nous apparaît important de vous faire ce rappel. Cela peut potentiellement conduire aux événements expliqués ci-dessus.

### **ACTIONS REQUISES DE VOTRE PART :**

Avant de commencer : Ne retirez pas le capuchon de la pile à moins d'avoir une nouvelle pile à disposition. Si vous disposez d'un capuchon de la pile de rechange non endommagé, assurez-vous qu'il est disponible à proximité.

**Lors du remplacement régulier de la pile, vérifiez le contact métallique du capuchon de la pile de votre pompe** pour voir s'il est desserré, endommagé ou manquant. N'essayez pas de soulever ou de déplacer le contact métallique lors de l'inspection (voir l'image ci-dessus).

- **Si le contact du capuchon de la pile n'est pas endommagé**, continuez à utiliser votre pompe et vérifiez si le capuchon de la pile est endommagé à chaque remplacement de la pile.
- **Si le contact du capuchon de la pile est endommagé**, remplacez-le immédiatement par un capuchon de rechange que vous avez peut-être reçu avec l'envoi initial de la pompe, et jetez le capuchon endommagé. Si vous n'avez pas de capuchon de rechange, arrêtez d'utiliser votre pompe et revenez à un plan de secours selon les recommandations de votre professionnel de santé. Contactez ensuite notre ligne d'assistance téléphonique / votre représentant local Medtronic au 0800 633 333 pour demander un capuchon de batterie de rechange.

- **Si vous n'êtes pas certain que le contact du capuchon de la pile soit endommagé,** remplacez-le par un capuchon de rechange ou contactez notre ligne d'assistance téléphonique / votre représentant local Medtronic au 0800 633 333.
- Faites toujours très attention au statut de votre pompe et de sa pile après insertion.

**ACTION MEDTRONIC :**

Nous travaillons sur un nouveau design du capuchon et vous tiendrons informés de sa prochaine disponibilité.

Chez Medtronic, votre sécurité est notre priorité absolue et nous nous engageons à offrir des traitements sûrs et efficaces. Nous vous remercions pour le temps et l'attention que vous avez consacrés à la lecture de cet avis.

Nous comprenons que cela a un impact sur votre expérience et nous sommes là pour vous soutenir. Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter notre ligne d'assistance téléphonique / votre représentant local Medtronic au 0800 633 333.

Cordialement,

**Medtronic (Schweiz) AG**