

VIDEOENDOSCOPIO GASTROINTESTINALE EVIS EXERA III


OLYMPUS GIF-1TH190***Istruzioni***

Di seguito si riporta l'aggiornamento delle informazioni sulla procedura di asciugatura durante la fase di risciacquo del Capitolo "5.7 Risciacquo dell'endoscopio e degli accessori dopo la disinfezione". In particolare, i passaggi seguenti sostituiscono o integrano la sezione "■ Asciugatura dell'endoscopio" del Capitolo 5.7 (dopo la sezione "■ Lavaggio con alcool"). Le parti restanti del manuale di istruzioni non sono state modificate.


■ Asciugatura dell'endoscopio**ATTENZIONE**

Durante l'immissione di aria nei canali dell'endoscopio, la pressione non deve superare 0,5 MPa (5 kgf/cm², 71 psig). Pressioni più elevate possono danneggiare l'endoscopio.


1. Coprire il terminale distale, il gruppo comandi e il connettore dell'endoscopio con panni sterili privi di pelucchi, per evitare il contatto con alcool o acqua fuoriusciti dalle aperture dei canali.

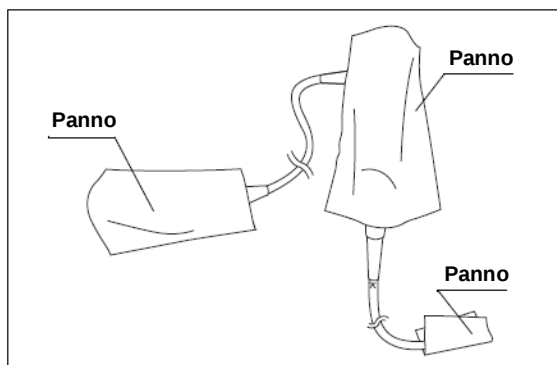


2. Immettere aria compressa filtrata con pressione di 0,2 - 0,5 MPa nell'apertura del cilindro di aspirazione finché non fuoriesca più alcool o acqua dal terminale distale, dall'ingresso del canale operativo o dal connettore di aspirazione. Erogare aria compressa per almeno 3 minuti per l'alcool e per almeno 90 secondi per l'acqua.

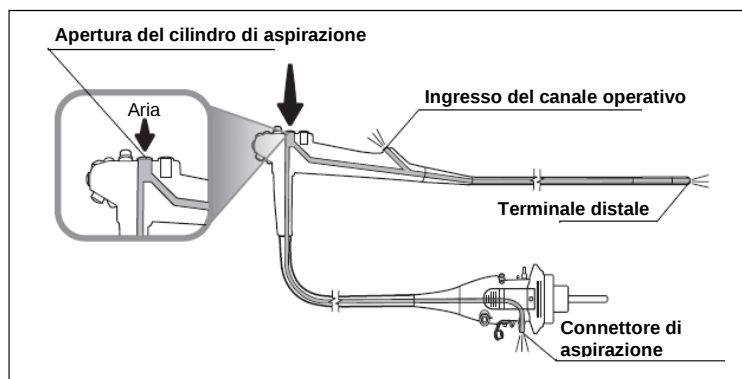


3. Immettere aria compressa filtrata con pressione di 0,2 - 0,5 MPa nell'apertura del cilindro aria/acqua finché non fuoriesca più alcool o acqua dal terminale distale, dal connettore di alimentazione dell'aria e dal tubo dell'aria dell'endoscopio. Erogare aria compressa per almeno 3 minuti per l'alcool e per almeno 90 secondi per l'acqua.

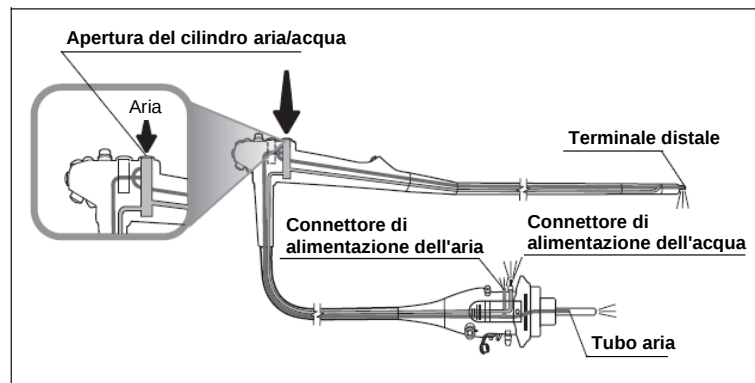


4 Immettere aria compressa filtrata con pressione di 0,2 - 0,5 MPa nell'ingresso dell'acqua ausiliario finché non fuoriesca più alcool o acqua dal terminale distale dell'endoscopio. Erogare aria compressa per almeno 3 minuti per l'alcool e per almeno 90 secondi per l'acqua.

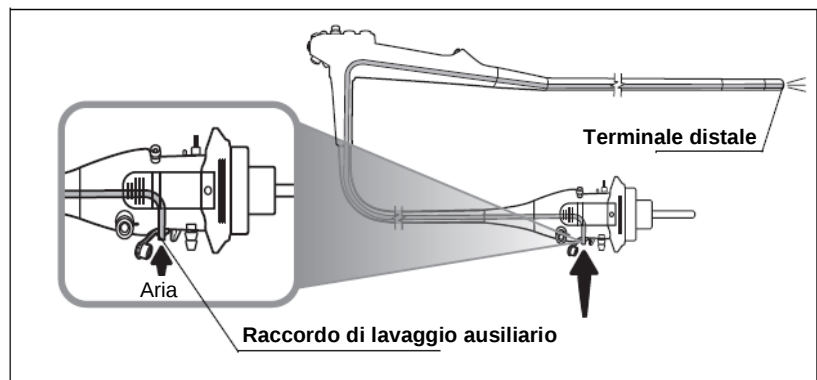


5. Immettere aria compressa filtrata con pressione di 0,2 - 0,5 MPa nell'ingresso del canale operativo finché non fuoriesca più alcool o acqua dal terminale distale dell'endoscopio. Erogare aria compressa per almeno 3 minuti per l'alcool e per almeno 90 secondi per l'acqua.

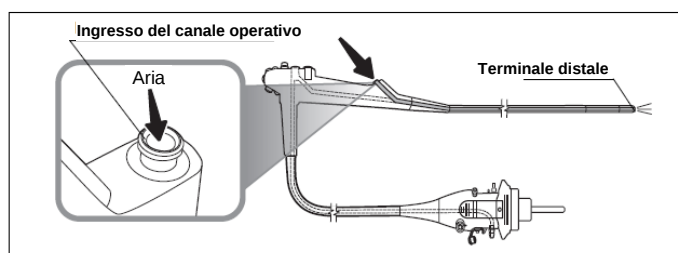

6. Asciugare accuratamente l'interno del cilindro di aspirazione, il cilindro aria/acqua e l'ingresso del canale operativo dell'endoscopio utilizzando tamponi sterili di cotone.

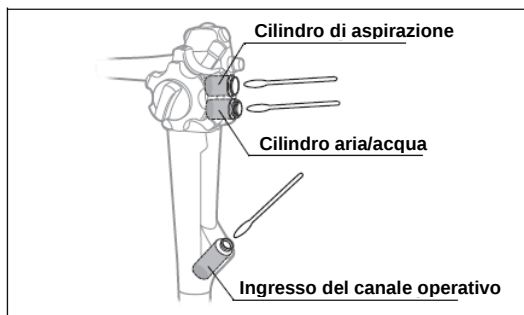

7. Asciugare accuratamente le superfici esterne dell'endoscopio con panni sterili privi di pelucchi.

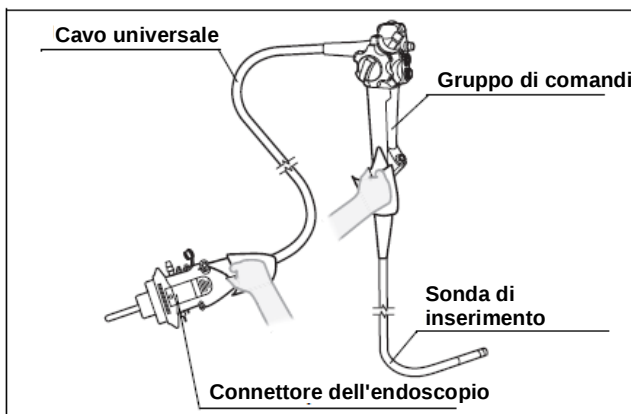

Fine.