

Referenz: 92977025-FA

30. November 2023

Dringender Sicherheitshinweis ZOOM Programmiergerät Modell 3120 mit Software Modell 2892

Betreff: Sicherheitshinweis – Ab dem 10. Januar 2024 wird der auf dem Programmiergerät Modell 3120 ZOOM™ verwendete Uhrparameter der Softwareanwendung Modell 2892 bestimmte Diagnosedaten falsch anzeigen.
Boston Scientific Korrekturmaßnahmen-Referenz: 92977025-FA.

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir möchten Sie darüber informieren, dass ab dem 10. Januar 2024 der Uhrparameter, der von der Softwareanwendung Modell 2892 auf dem Programmiergerät Modell 3120 ZOOM verwendet wird, bestimmte Zeitangaben zu Diagnosedaten falsch anzeigt, nämlich mit einer Jahreszahl in den 1990er-Jahren. Die Softwareanwendung Modell 2892 unterstützt etwa 8.400 der verbleibenden Herzschrittmacher der ALTRUA™-, INSIGNIA™- und NEXUS™-Produktfamilien, die zwischen Oktober 2001 und August 2018 vertrieben wurden. Dieses Verhalten hat keinen Einfluss auf die Funktion des Herzschrittmachers. Das Programmiergerät Modell 3120 ZOOM wird bald obsolet und wird durch das LATITUDE™ Programmiergerät Modell 3300 ersetzt.

Beschreibung des unerwarteten Verhaltens und klinische Auswirkungen:

Die Softwareanwendung Modell 2892 ermittelt die Datumsinformationen mithilfe der Uhr des ZOOM-Programmiergeräts Modell 3120. Basierend auf dem Design der Softwareanwendung Modell 2892 unterstützt der Uhrenparameter Daten vom 1. Januar 1990 bis zum 10. Januar 2024. Nach diesem Datum startet der Uhrparameter neu und zeigt bestimmte Diagnosedaten auf dem Bildschirm des Programmiergeräts, beim Speichern auf der Festplatte und in gedruckten Berichten falsch an.

- Zu den betroffenen Diagnosedaten, die am oder nach dem 10. Januar 2024 falsch angezeigt werden, gehören das Datum des letzten Batterietests, das Datum der letzten Programmierung, das Datum der letzten Abfrage, das Datum des letzten Zurücksetzens von Zählern/Histogrammen und die Daten von Folgetests wie intrinsische Amplitude, Stimulationsimpedanz und Stimulations-Reizschwellentests.
Beachten Sie, dass alle Daten auf einem LATITUDE Programmiergerät Modell 3300 korrekt angezeigt werden.
- Die Daten des Austauschindikators und das Datum der Ereignisse im Arrhythmie-Logbuch sind nicht betroffen und werden korrekt angezeigt.
- Dies hat keinen Einfluss auf die Leistung des Herzschrittmachers, die verbleibende Funktionsdauer des Herzschrittmachers oder die Anzeige der verbleibenden Batteriekapazität.

Dieses Verhalten betrifft nur Herzschrittmacher, die durch die Software Modell 2892 auf dem Programmiergerät Modell 3120 ZOOM unterstützt werden, und hat keine Auswirkungen auf die Datumsanzeige auf dem LATITUDE Programmiergerät Modell 3300 oder dem in USA verfügbaren System LATITUDE Consult™.

Empfehlung:

- Bitte bewahren Sie dieses Schreiben bei allen Programmiergeräten des Modells 3120 in Ihrer Einrichtung auf oder verteilen Sie dieses Schreiben an alle medizinischen Fachkräfte, die Herzschrittmacherkontrollen mit einem ZOOM Programmiergerät Modell 3120 durchführen. Wenn die Softwareanwendung Modell 2892 auf dem ZOOM-Programmiergerät Modell 3120 verwendet wird und ein Datum aus den 1990er-Jahren enthält, können die Gesundheitsfachkräfte folgendes tun:
 - Bestimmung eines genauen Datums durch Abfrage eines ALTRUA-, INSIGNIA- oder NEXUS-Herzschrittmachers mit einem LATITUDE Programmiergerät Modell 3300; oder
 - Anhand der Tabelle in Anhang A ein ungefähres Datum (innerhalb einer Spanne von zwei Tagen) bestimmen.
- Boston Scientific empfiehlt keinen prophylaktischen Austausch von Herzschrittmachern aufgrund von falschen Daten.
- Bitte **füllen Sie das beigefügte Bestätigungsformular aus** und **senden Sie es bis zum 22. Oktober 2023 unter «Customer_Service_Fax_Number» an Boston Scientific**. Ein ausgefülltes Formular ist von jeder Einrichtung erforderlich, die dieses Schreiben erhält.

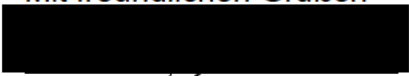
Weitere Informationen:

Ihre zuständige Behörde wurde über diesen Sicherheitshinweis (FSN) informiert.

Obwohl wir uns der möglichen Auswirkungen derartiger Mitteilungen für Sie und Ihre Patienten bewusst sind, fühlen wir uns dennoch zu einer transparenten Kommunikation mit Ärzten und Gesundheitsfachkräften verpflichtet, um sicherzustellen, dass Sie zeitgerechte, relevante Informationen für die Behandlung Ihrer Patienten erhalten.

Wenn Sie Fragen zu dieser Information haben oder ein unerwünschtes Ereignis melden möchten, wenden Sie sich bitte an Ihre Boston Scientific-Vertretung oder den technischen Kundendienst von Boston Scientific sowie ggf. an Ihre zuständige lokale Aufsichtsbehörde.

Mit freundlichen Grüßen


Alexandra Naughton
Vice President, Quality Assurance

Anhang A

Basierend auf dem Design der Softwareanwendung Modell 2892 unterstützt der Uhrenparameter Daten vom 1. Januar 1990 bis 13.37 Uhr Ortszeit am 10. Januar 2024. Nach diesem Datum startet der Uhrparameter neu und zeigt bestimmte Diagnosedaten auf dem Bildschirm des Programmiergeräts, beim Speichern auf der Festplatte und in gedruckten Berichten falsch an. Da der Uhrparameter am 10. Januar 2024 um 13.37 Uhr Ortszeit neu startet, wird das tatsächliche Datum entweder das unten angegebene ungefähre Datum oder der nächste Tag sein, je nachdem, zu welcher Tageszeit das Diagnosedatum aufgetreten ist. Ein genaues Datum kann durch Abfrage des Herzschrittmachers mit einem Programmiergerät Modell 3300 LATITUDE ermittelt werden.

Displayed Date	Approximate Date	Displayed Date	Approximate Date	Displayed Date	Approximate Date	Displayed Date	Approximate Date
1-Jan-1990	10-Jan-2024	4-Feb-1990	13-Feb-2024	10-Mar-1990	18-Mar-2024	13-Apr-1990	21-Apr-2024
2-Jan-1990	11-Jan-2024	5-Feb-1990	14-Feb-2024	11-Mar-1990	19-Mar-2024	14-Apr-1990	22-Apr-2024
3-Jan-1990	12-Jan-2024	6-Feb-1990	15-Feb-2024	12-Mar-1990	20-Mar-2024	15-Apr-1990	23-Apr-2024
4-Jan-1990	13-Jan-2024	7-Feb-1990	16-Feb-2024	13-Mar-1990	21-Mar-2024	16-Apr-1990	24-Apr-2024
5-Jan-1990	14-Jan-2024	8-Feb-1990	17-Feb-2024	14-Mar-1990	22-Mar-2024	17-Apr-1990	25-Apr-2024
6-Jan-1990	15-Jan-2024	9-Feb-1990	18-Feb-2024	15-Mar-1990	23-Mar-2024	18-Apr-1990	26-Apr-2024
7-Jan-1990	16-Jan-2024	10-Feb-1990	19-Feb-2024	16-Mar-1990	24-Mar-2024	19-Apr-1990	27-Apr-2024
8-Jan-1990	17-Jan-2024	11-Feb-1990	20-Feb-2024	17-Mar-1990	25-Mar-2024	20-Apr-1990	28-Apr-2024
9-Jan-1990	18-Jan-2024	12-Feb-1990	21-Feb-2024	18-Mar-1990	26-Mar-2024	21-Apr-1990	29-Apr-2024
10-Jan-1990	19-Jan-2024	13-Feb-1990	22-Feb-2024	19-Mar-1990	27-Mar-2024	22-Apr-1990	30-Apr-2024
11-Jan-1990	20-Jan-2024	14-Feb-1990	23-Feb-2024	20-Mar-1990	28-Mar-2024	23-Apr-1990	1-May-2024
12-Jan-1990	21-Jan-2024	15-Feb-1990	24-Feb-2024	21-Mar-1990	29-Mar-2024	24-Apr-1990	2-May-2024
13-Jan-1990	22-Jan-2024	16-Feb-1990	25-Feb-2024	22-Mar-1990	30-Mar-2024	25-Apr-1990	3-May-2024
14-Jan-1990	23-Jan-2024	17-Feb-1990	26-Feb-2024	23-Mar-1990	31-Mar-2024	26-Apr-1990	4-May-2024
15-Jan-1990	24-Jan-2024	18-Feb-1990	27-Feb-2024	24-Mar-1990	1-Apr-2024	27-Apr-1990	5-May-2024
16-Jan-1990	25-Jan-2024	19-Feb-1990	28-Feb-2024	25-Mar-1990	2-Apr-2024	28-Apr-1990	6-May-2024
17-Jan-1990	26-Jan-2024	20-Feb-1990	29-Feb-2024	26-Mar-1990	3-Apr-2024	29-Apr-1990	7-May-2024
18-Jan-1990	27-Jan-2024	21-Feb-1990	1-Mar-2024	27-Mar-1990	4-Apr-2024	30-Apr-1990	8-May-2024
19-Jan-1990	28-Jan-2024	22-Feb-1990	2-Mar-2024	28-Mar-1990	5-Apr-2024	1-May-1990	9-May-2024
20-Jan-1990	29-Jan-2024	23-Feb-1990	3-Mar-2024	29-Mar-1990	6-Apr-2024	2-May-1990	10-May-2024
21-Jan-1990	30-Jan-2024	24-Feb-1990	4-Mar-2024	30-Mar-1990	7-Apr-2024	3-May-1990	11-May-2024
22-Jan-1990	31-Jan-2024	25-Feb-1990	5-Mar-2024	31-Mar-1990	8-Apr-2024	4-May-1990	12-May-2024
23-Jan-1990	1-Feb-2024	26-Feb-1990	6-Mar-2024	1-Apr-1990	9-Apr-2024	5-May-1990	13-May-2024
24-Jan-1990	2-Feb-2024	27-Feb-1990	7-Mar-2024	2-Apr-1990	10-Apr-2024	6-May-1990	14-May-2024
25-Jan-1990	3-Feb-2024	28-Feb-1990	8-Mar-2024	3-Apr-1990	11-Apr-2024	7-May-1990	15-May-2024
26-Jan-1990	4-Feb-2024	1-Mar-1990	9-Mar-2024	4-Apr-1990	12-Apr-2024	8-May-1990	16-May-2024
27-Jan-1990	5-Feb-2024	2-Mar-1990	10-Mar-2024	5-Apr-1990	13-Apr-2024	9-May-1990	17-May-2024
28-Jan-1990	6-Feb-2024	3-Mar-1990	11-Mar-2024	6-Apr-1990	14-Apr-2024	10-May-1990	18-May-2024
29-Jan-1990	7-Feb-2024	4-Mar-1990	12-Mar-2024	7-Apr-1990	15-Apr-2024	11-May-1990	19-May-2024
30-Jan-1990	8-Feb-2024	5-Mar-1990	13-Mar-2024	8-Apr-1990	16-Apr-2024	12-May-1990	20-May-2024
31-Jan-1990	9-Feb-2024	6-Mar-1990	14-Mar-2024	9-Apr-1990	17-Apr-2024	13-May-1990	21-May-2024
1-Feb-1990	10-Feb-2024	7-Mar-1990	15-Mar-2024	10-Apr-1990	18-Apr-2024	14-May-1990	22-May-2024
2-Feb-1990	11-Feb-2024	8-Mar-1990	16-Mar-2024	11-Apr-1990	19-Apr-2024	15-May-1990	23-May-2024
3-Feb-1990	12-Feb-2024	9-Mar-1990	17-Mar-2024	12-Apr-1990	20-Apr-2024	16-May-1990	24-May-2024

Displayed Date	Approximate Date	Displayed Date	Approximate Date	Displayed Date	Approximate Date	Displayed Date	Approximate Date
17-May-1990	25-May-2024	4-Jul-1990	12-Jul-2024	21-Aug-1990	29-Aug-2024	8-Oct-1990	16-Oct-2024
18-May-1990	26-May-2024	5-Jul-1990	13-Jul-2024	22-Aug-1990	30-Aug-2024	9-Oct-1990	17-Oct-2024
19-May-1990	27-May-2024	6-Jul-1990	14-Jul-2024	23-Aug-1990	31-Aug-2024	10-Oct-1990	18-Oct-2024
20-May-1990	28-May-2024	7-Jul-1990	15-Jul-2024	24-Aug-1990	1-Sep-2024	11-Oct-1990	19-Oct-2024
21-May-1990	29-May-2024	8-Jul-1990	16-Jul-2024	25-Aug-1990	2-Sep-2024	12-Oct-1990	20-Oct-2024
22-May-1990	30-May-2024	9-Jul-1990	17-Jul-2024	26-Aug-1990	3-Sep-2024	13-Oct-1990	21-Oct-2024
23-May-1990	31-May-2024	10-Jul-1990	18-Jul-2024	27-Aug-1990	4-Sep-2024	14-Oct-1990	22-Oct-2024
24-May-1990	1-Jun-2024	11-Jul-1990	19-Jul-2024	28-Aug-1990	5-Sep-2024	15-Oct-1990	23-Oct-2024
25-May-1990	2-Jun-2024	12-Jul-1990	20-Jul-2024	29-Aug-1990	6-Sep-2024	16-Oct-1990	24-Oct-2024
26-May-1990	3-Jun-2024	13-Jul-1990	21-Jul-2024	30-Aug-1990	7-Sep-2024	17-Oct-1990	25-Oct-2024
27-May-1990	4-Jun-2024	14-Jul-1990	22-Jul-2024	31-Aug-1990	8-Sep-2024	18-Oct-1990	26-Oct-2024
28-May-1990	5-Jun-2024	15-Jul-1990	23-Jul-2024	1-Sep-1990	9-Sep-2024	19-Oct-1990	27-Oct-2024
29-May-1990	6-Jun-2024	16-Jul-1990	24-Jul-2024	2-Sep-1990	10-Sep-2024	20-Oct-1990	28-Oct-2024
30-May-1990	7-Jun-2024	17-Jul-1990	25-Jul-2024	3-Sep-1990	11-Sep-2024	21-Oct-1990	29-Oct-2024
31-May-1990	8-Jun-2024	18-Jul-1990	26-Jul-2024	4-Sep-1990	12-Sep-2024	22-Oct-1990	30-Oct-2024
1-Jun-1990	9-Jun-2024	19-Jul-1990	27-Jul-2024	5-Sep-1990	13-Sep-2024	23-Oct-1990	31-Oct-2024
2-Jun-1990	10-Jun-2024	20-Jul-1990	28-Jul-2024	6-Sep-1990	14-Sep-2024	24-Oct-1990	1-Nov-2024
3-Jun-1990	11-Jun-2024	21-Jul-1990	29-Jul-2024	7-Sep-1990	15-Sep-2024	25-Oct-1990	2-Nov-2024
4-Jun-1990	12-Jun-2024	22-Jul-1990	30-Jul-2024	8-Sep-1990	16-Sep-2024	26-Oct-1990	3-Nov-2024
5-Jun-1990	13-Jun-2024	23-Jul-1990	31-Jul-2024	9-Sep-1990	17-Sep-2024	27-Oct-1990	4-Nov-2024
6-Jun-1990	14-Jun-2024	24-Jul-1990	1-Aug-2024	10-Sep-1990	18-Sep-2024	28-Oct-1990	5-Nov-2024
7-Jun-1990	15-Jun-2024	25-Jul-1990	2-Aug-2024	11-Sep-1990	19-Sep-2024	29-Oct-1990	6-Nov-2024
8-Jun-1990	16-Jun-2024	26-Jul-1990	3-Aug-2024	12-Sep-1990	20-Sep-2024	30-Oct-1990	7-Nov-2024
9-Jun-1990	17-Jun-2024	27-Jul-1990	4-Aug-2024	13-Sep-1990	21-Sep-2024	31-Oct-1990	8-Nov-2024
10-Jun-1990	18-Jun-2024	28-Jul-1990	5-Aug-2024	14-Sep-1990	22-Sep-2024	1-Nov-1990	9-Nov-2024
11-Jun-1990	19-Jun-2024	29-Jul-1990	6-Aug-2024	15-Sep-1990	23-Sep-2024	2-Nov-1990	10-Nov-2024
12-Jun-1990	20-Jun-2024	30-Jul-1990	7-Aug-2024	16-Sep-1990	24-Sep-2024	3-Nov-1990	11-Nov-2024
13-Jun-1990	21-Jun-2024	31-Jul-1990	8-Aug-2024	17-Sep-1990	25-Sep-2024	4-Nov-1990	12-Nov-2024
14-Jun-1990	22-Jun-2024	1-Aug-1990	9-Aug-2024	18-Sep-1990	26-Sep-2024	5-Nov-1990	13-Nov-2024
15-Jun-1990	23-Jun-2024	2-Aug-1990	10-Aug-2024	19-Sep-1990	27-Sep-2024	6-Nov-1990	14-Nov-2024
16-Jun-1990	24-Jun-2024	3-Aug-1990	11-Aug-2024	20-Sep-1990	28-Sep-2024	7-Nov-1990	15-Nov-2024
17-Jun-1990	25-Jun-2024	4-Aug-1990	12-Aug-2024	21-Sep-1990	29-Sep-2024	8-Nov-1990	16-Nov-2024
18-Jun-1990	26-Jun-2024	5-Aug-1990	13-Aug-2024	22-Sep-1990	30-Sep-2024	9-Nov-1990	17-Nov-2024
19-Jun-1990	27-Jun-2024	6-Aug-1990	14-Aug-2024	23-Sep-1990	1-Oct-2024	10-Nov-1990	18-Nov-2024
20-Jun-1990	28-Jun-2024	7-Aug-1990	15-Aug-2024	24-Sep-1990	2-Oct-2024	11-Nov-1990	19-Nov-2024
21-Jun-1990	29-Jun-2024	8-Aug-1990	16-Aug-2024	25-Sep-1990	3-Oct-2024	12-Nov-1990	20-Nov-2024
22-Jun-1990	30-Jun-2024	9-Aug-1990	17-Aug-2024	26-Sep-1990	4-Oct-2024	13-Nov-1990	21-Nov-2024
23-Jun-1990	1-Jul-2024	10-Aug-1990	18-Aug-2024	27-Sep-1990	5-Oct-2024	14-Nov-1990	22-Nov-2024
24-Jun-1990	2-Jul-2024	11-Aug-1990	19-Aug-2024	28-Sep-1990	6-Oct-2024	15-Nov-1990	23-Nov-2024
25-Jun-1990	3-Jul-2024	12-Aug-1990	20-Aug-2024	29-Sep-1990	7-Oct-2024	16-Nov-1990	24-Nov-2024
26-Jun-1990	4-Jul-2024	13-Aug-1990	21-Aug-2024	30-Sep-1990	8-Oct-2024	17-Nov-1990	25-Nov-2024
27-Jun-1990	5-Jul-2024	14-Aug-1990	22-Aug-2024	1-Oct-1990	9-Oct-2024	18-Nov-1990	26-Nov-2024
28-Jun-1990	6-Jul-2024	15-Aug-1990	23-Aug-2024	2-Oct-1990	10-Oct-2024	19-Nov-1990	27-Nov-2024
29-Jun-1990	7-Jul-2024	16-Aug-1990	24-Aug-2024	3-Oct-1990	11-Oct-2024	20-Nov-1990	28-Nov-2024
30-Jun-1990	8-Jul-2024	17-Aug-1990	25-Aug-2024	4-Oct-1990	12-Oct-2024	21-Nov-1990	29-Nov-2024
1-Jul-1990	9-Jul-2024	18-Aug-1990	26-Aug-2024	5-Oct-1990	13-Oct-2024	22-Nov-1990	30-Nov-2024
2-Jul-1990	10-Jul-2024	19-Aug-1990	27-Aug-2024	6-Oct-1990	14-Oct-2024	23-Nov-1990	1-Dec-2024
3-Jul-1990	11-Jul-2024	20-Aug-1990	28-Aug-2024	7-Oct-1990	15-Oct-2024	24-Nov-1990	2-Dec-2024

Displayed Date	Approximate Date	Displayed Date	Approximate Date	Displayed Date	Approximate Date	Displayed Date	Approximate Date
25-Nov-1990	3-Dec-2024	12-Jan-1991	20-Jan-2025	1-Mar-1991	9-Mar-2025	18-Apr-1991	26-Apr-2025
26-Nov-1990	4-Dec-2024	13-Jan-1991	21-Jan-2025	2-Mar-1991	10-Mar-2025	19-Apr-1991	27-Apr-2025
27-Nov-1990	5-Dec-2024	14-Jan-1991	22-Jan-2025	3-Mar-1991	11-Mar-2025	20-Apr-1991	28-Apr-2025
28-Nov-1990	6-Dec-2024	15-Jan-1991	23-Jan-2025	4-Mar-1991	12-Mar-2025	21-Apr-1991	29-Apr-2025
29-Nov-1990	7-Dec-2024	16-Jan-1991	24-Jan-2025	5-Mar-1991	13-Mar-2025	22-Apr-1991	30-Apr-2025
30-Nov-1990	8-Dec-2024	17-Jan-1991	25-Jan-2025	6-Mar-1991	14-Mar-2025	23-Apr-1991	1-May-2025
1-Dec-1990	9-Dec-2024	18-Jan-1991	26-Jan-2025	7-Mar-1991	15-Mar-2025	24-Apr-1991	2-May-2025
2-Dec-1990	10-Dec-2024	19-Jan-1991	27-Jan-2025	8-Mar-1991	16-Mar-2025	25-Apr-1991	3-May-2025
3-Dec-1990	11-Dec-2024	20-Jan-1991	28-Jan-2025	9-Mar-1991	17-Mar-2025	26-Apr-1991	4-May-2025
4-Dec-1990	12-Dec-2024	21-Jan-1991	29-Jan-2025	10-Mar-1991	18-Mar-2025	27-Apr-1991	5-May-2025
5-Dec-1990	13-Dec-2024	22-Jan-1991	30-Jan-2025	11-Mar-1991	19-Mar-2025	28-Apr-1991	6-May-2025
6-Dec-1990	14-Dec-2024	23-Jan-1991	31-Jan-2025	12-Mar-1991	20-Mar-2025	29-Apr-1991	7-May-2025
7-Dec-1990	15-Dec-2024	24-Jan-1991	1-Feb-2025	13-Mar-1991	21-Mar-2025	30-Apr-1991	8-May-2025
8-Dec-1990	16-Dec-2024	25-Jan-1991	2-Feb-2025	14-Mar-1991	22-Mar-2025	1-May-1991	9-May-2025
9-Dec-1990	17-Dec-2024	26-Jan-1991	3-Feb-2025	15-Mar-1991	23-Mar-2025	2-May-1991	10-May-2025
10-Dec-1990	18-Dec-2024	27-Jan-1991	4-Feb-2025	16-Mar-1991	24-Mar-2025	3-May-1991	11-May-2025
11-Dec-1990	19-Dec-2024	28-Jan-1991	5-Feb-2025	17-Mar-1991	25-Mar-2025	4-May-1991	12-May-2025
12-Dec-1990	20-Dec-2024	29-Jan-1991	6-Feb-2025	18-Mar-1991	26-Mar-2025	5-May-1991	13-May-2025
13-Dec-1990	21-Dec-2024	30-Jan-1991	7-Feb-2025	19-Mar-1991	27-Mar-2025	6-May-1991	14-May-2025
14-Dec-1990	22-Dec-2024	31-Jan-1991	8-Feb-2025	20-Mar-1991	28-Mar-2025	7-May-1991	15-May-2025
15-Dec-1990	23-Dec-2024	1-Feb-1991	9-Feb-2025	21-Mar-1991	29-Mar-2025	8-May-1991	16-May-2025
16-Dec-1990	24-Dec-2024	2-Feb-1991	10-Feb-2025	22-Mar-1991	30-Mar-2025	9-May-1991	17-May-2025
17-Dec-1990	25-Dec-2024	3-Feb-1991	11-Feb-2025	23-Mar-1991	31-Mar-2025	10-May-1991	18-May-2025
18-Dec-1990	26-Dec-2024	4-Feb-1991	12-Feb-2025	24-Mar-1991	1-Apr-2025	11-May-1991	19-May-2025
19-Dec-1990	27-Dec-2024	5-Feb-1991	13-Feb-2025	25-Mar-1991	2-Apr-2025	12-May-1991	20-May-2025
20-Dec-1990	28-Dec-2024	6-Feb-1991	14-Feb-2025	26-Mar-1991	3-Apr-2025	13-May-1991	21-May-2025
21-Dec-1990	29-Dec-2024	7-Feb-1991	15-Feb-2025	27-Mar-1991	4-Apr-2025	14-May-1991	22-May-2025
22-Dec-1990	30-Dec-2024	8-Feb-1991	16-Feb-2025	28-Mar-1991	5-Apr-2025	15-May-1991	23-May-2025
23-Dec-1990	31-Dec-2024	9-Feb-1991	17-Feb-2025	29-Mar-1991	6-Apr-2025	16-May-1991	24-May-2025
24-Dec-1990	1-Jan-2025	10-Feb-1991	18-Feb-2025	30-Mar-1991	7-Apr-2025	17-May-1991	25-May-2025
25-Dec-1990	2-Jan-2025	11-Feb-1991	19-Feb-2025	31-Mar-1991	8-Apr-2025	18-May-1991	26-May-2025
26-Dec-1990	3-Jan-2025	12-Feb-1991	20-Feb-2025	1-Apr-1991	9-Apr-2025	19-May-1991	27-May-2025
27-Dec-1990	4-Jan-2025	13-Feb-1991	21-Feb-2025	2-Apr-1991	10-Apr-2025	20-May-1991	28-May-2025
28-Dec-1990	5-Jan-2025	14-Feb-1991	22-Feb-2025	3-Apr-1991	11-Apr-2025	21-May-1991	29-May-2025
29-Dec-1990	6-Jan-2025	15-Feb-1991	23-Feb-2025	4-Apr-1991	12-Apr-2025	22-May-1991	30-May-2025
30-Dec-1990	7-Jan-2025	16-Feb-1991	24-Feb-2025	5-Apr-1991	13-Apr-2025	23-May-1991	31-May-2025
31-Dec-1990	8-Jan-2025	17-Feb-1991	25-Feb-2025	6-Apr-1991	14-Apr-2025	24-May-1991	1-Jun-2025
1-Jan-1991	9-Jan-2025	18-Feb-1991	26-Feb-2025	7-Apr-1991	15-Apr-2025	25-May-1991	2-Jun-2025
2-Jan-1991	10-Jan-2025	19-Feb-1991	27-Feb-2025	8-Apr-1991	16-Apr-2025	26-May-1991	3-Jun-2025
3-Jan-1991	11-Jan-2025	20-Feb-1991	28-Feb-2025	9-Apr-1991	17-Apr-2025	27-May-1991	4-Jun-2025
4-Jan-1991	12-Jan-2025	21-Feb-1991	1-Mar-2025	10-Apr-1991	18-Apr-2025	28-May-1991	5-Jun-2025
5-Jan-1991	13-Jan-2025	22-Feb-1991	2-Mar-2025	11-Apr-1991	19-Apr-2025	29-May-1991	6-Jun-2025
6-Jan-1991	14-Jan-2025	23-Feb-1991	3-Mar-2025	12-Apr-1991	20-Apr-2025	30-May-1991	7-Jun-2025
7-Jan-1991	15-Jan-2025	24-Feb-1991	4-Mar-2025	13-Apr-1991	21-Apr-2025	31-May-1991	8-Jun-2025
8-Jan-1991	16-Jan-2025	25-Feb-1991	5-Mar-2025	14-Apr-1991	22-Apr-2025	1-Jun-1991	9-Jun-2025
9-Jan-1991	17-Jan-2025	26-Feb-1991	6-Mar-2025	15-Apr-1991	23-Apr-2025	2-Jun-1991	10-Jun-2025
10-Jan-1991	18-Jan-2025	27-Feb-1991	7-Mar-2025	16-Apr-1991	24-Apr-2025	3-Jun-1991	11-Jun-2025
11-Jan-1991	19-Jan-2025	28-Feb-1991	8-Mar-2025	17-Apr-1991	25-Apr-2025	4-Jun-1991	12-Jun-2025

Bitte füllen Sie das Formular aus und senden Sie es an:
«Customer_Service_Fax_Number»

«Sold_to» - «Hospital_Name» - «City» - «Country»

Bestätigungsformular – Dringender Sicherheitshinweis

ZOOM PRM Modell 3120 mit Software Modell 2892

92977025-FA

Durch meine Unterschrift bestätige ich

**den Erhalt und die Kenntnisnahme
des Sicherheitshinweis von Boston Scientific**

vom 30. November 2023 für:

ZOOM Programmiergerät Modell 3120 mit Software Modell 2892

NAME* _____ **Titel** _____

Telefon _____ **E-Mail** _____

UNTERSCHRIFT* _____ **DATUM*** _____
* Pflichtfeld tt/mm/jjjj