

20 Mai 2021

DRINGEND: SICHERHEITSHINWEIS – PI-21-4000

Venovo™ Venöses Stentsystem

REF.: Siehe Anhang 1

LOTS: Alle nicht verfallenen Produkte

Art der Maßnahme: Produktentfernung

Z. Hd.: Venenspezialisten, klinisches Personal, Risikomanager, biomedizinisches Personal, Beauftragte für Medizinproduktesicherheit

Dieses Schreiben enthält wichtige Informationen, die Ihre Aufmerksamkeit erfordern.

Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,

BD gibt diesen dringenden Sicherheitshinweis heraus, um alle noch nicht abgelaufenen Chargen des **Venovo™ Venöses Stentsystems** vom Markt zurückzurufen (siehe Anhang 1 für Katalognummern/REFs und Lot-Nummern, die von BD an den EMEA-Markt geliefert wurden). Aus unseren Vertriebsunterlagen geht hervor, dass Ihre Organisation möglicherweise betroffene Produkte erhalten hat.

Beschreibung des Problems

BD hat durch Kundenreklamationen festgestellt, dass das **Venovo™ Venöse Stentsystem** möglicherweise Probleme bei der Freisetzung aufweisen kann, wodurch das proximale Ende des Stents möglicherweise nicht sofort nach der Freisetzung expandiert. Das proximale Ende des Stents bleibt stattdessen mit dem Stentkissen am Einführsystem verbunden, wie in Abbildung 1 unten dargestellt. Während der Untersuchung von betroffenen Produkten wurden Spuren von Kissenmaterial (medizinisches und biokompatibles Silikon) festgestellt, das fest an der Innenseite des Stents haftete, wo das Stentkissen in Kontakt mit dem Stent kam.



Abbildung 1: Proximales Segment des Stents bleibt mit dem Stentkissen verbunden.

Klinische Auswirkungen

In Fällen, in denen der Stent verzögert, aber selbstständig expandiert, besteht kein zusätzliches Risiko einer Schädigung. Dagegen kann eine zu starke Manipulation am Implantationssystem, um die Expansion des Stents zu unterstützen, oder der Versuch die Expansion zu erzwingen, möglicherweise zu Schäden unterschiedlichen Ausmaßes führen. Mögliche Schäden reichen von einer Verlängerung der Prozedur, einer Beschädigung oder Verformung des Stents, einer möglichen Gefäßverletzung, einer hämodynamischen Störung, die den Blutfluss beeinträchtigt und/oder hinzu einem thrombotischen Ereignis.

Bisher hat BD Reklamationen zu verschiedenen Größen des Produktangebots erhalten. Die Gefährdungssituation besteht darin, dass sich der Stent in einem fokalen Bereich nahe seinem proximalen Ende zum Zeitpunkt der Freisetzung nicht sofort expandiert und der Arzt möglicherweise nicht genügend Zeit für eine normale Expansion

einräumt und versucht, den Stent zu manipulieren oder andere intravaskuläre Geräte oder Techniken zu verwenden, um den Stent zu expandieren. Dies kann zu einer Fehlplatzierung oder Schäden am Stent und zu Gefäßverletzungen führen. Eine Übertragung von biokompatiblen Silikon von medizinischer Qualität, das an der Innenseite des Stents haftet, könnte, wenn sie von beträchtlicher Größe ist und sich löst, zu Entzündungsreaktionen oder einer Blockierung/Verstopfung eines Gefäßes führen.

Wenn das Produkt bereits ohne Komplikationen verwendet wurde, sind keine Nachsorgeuntersuchungen für Patienten erforderlich. Bitte melden Sie BD alle negativen gesundheitlichen Folgen, die bei der Verwendung dieses Produkts auftreten, sofern dies noch nicht geschehen ist.

Korrekturmaßnahme durch BD

BD hat die Herstellung des Produkts im Rahmen dieses Sicherheitshinweis eingestellt und führt eine detaillierte Ursachenanalyse des Problems durch.

Empfehlungen zu den vom Anwender zu ergreifenden Maßnahmen

1. Bitte stellen Sie die Verwendung des **Venovo™ Venösen Stentsystems** ein.
2. Identifizieren Sie alle Chargen des **Venovo™ Venösen Stentsystems**, separieren und bereiten Sie sie zur Abholung vor (siehe Anhang 1 für die Katalognummern (REF) und Lot-Nummern).
 - a. Alle Lots mit einem Verfallsdatum nach April 2021 fallen in den Geltungsbereich dieser Produktentfernung (bitte beachten Sie Anhang 2, um das Verfallsdatum auf dem Produktetikett zu identifizieren).
3. Leiten Sie diesen dringenden Sicherheitshinweis an alle Personen in Ihrer Organisation weiter, die das **Venovo™ Venöse Stentsystem** möglicherweise verwenden.
4. Sollten Sie das Produkt weitervertrieben haben, ermitteln Sie bitte die jeweiligen Anwender und setzen Sie diese sofort von diesem dringenden Sicherheitshinweis in Kenntnis.
5. Senden Sie das ausgefüllte Kundenantwortformular auf Seite 3 umgehend, spätestens jedoch bis zum **30. Juni 2021** an **BDRegAffairs_GSA@bd.com** zurück.
 - a. HINWEIS: Sollten Sie das Produkt nicht mehr verwenden oder in Besitz haben, senden Sie uns das Kundenantwortformular bitte trotzdem zum Zweck des Abgleichs zurück.
 - b. HINWEIS: BD stellt allen vom Rückruf betroffenen Kunden eine Gutschrift für die noch vorrätigen Produkte aus. Nach Erhalt des ausgefüllten Kundenantwortformulars wird sich der zuständige Vertriebsmitarbeiter mit Ihnen, bezüglich der Abholung der betroffenen Produkte, in Verbindung setzen.

Sollten Sie Fragen oder Probleme im Zusammenhang mit dem in diesem dringenden Sicherheitshinweis beschriebenen Produkt haben oder Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren BD Vertreter vor Ort.

Wir bestätigen, dass die zuständigen Aufsichtsbehörden über diese Maßnahme informiert wurden.

BD hat sich zum Ziel gesetzt, sicherzustellen, dass Kunden sichere und wirksame Produkte zur Verfügung stehen. Diese Verpflichtung wurde bei der Entscheidung, den vorliegenden dringenden Sicherheitshinweis zu erstellen, berücksichtigt.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Mithilfe.

Herzliche Grüße,

Lorna Darrock
Senior Manager Post Market Quality, EMEA

Kundenantwortformular – PI-21-4000

Venovo™ Venöses Stentsystem

Bitte lesen Sie diesen Anhang zusammen mit dem dringenden Sicherheitshinweis PI-21-4000 und senden Sie das ausgefüllte und unterschriebene Kundenantwortformular umgehend, aber **spätestens bis zum 30. Juni 2021** an **BRegAffairs_GSA@bd.com** zurück.

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass diese Mitteilung gelesen und verstanden wurde und dass alle empfohlenen Maßnahmen wie erforderlich umgesetzt wurden.

Bitte kreuzen Sie das entsprechende Kästchen an:

☐ Es befinden sich keine der betroffenen Produkte in unserem Besitz.

ODER

☐ Wir haben Einheiten des betroffenen Produkts und bestätigen, dass die unten aufgeführte Anzahl von Produkten identifiziert und separiert wurde (***bitte fügen Sie bei Bedarf weitere Listen bei***).

Katalognummer (REF)	Lot-Nummer	Anzahl der separierten Produkte (Einheiten)		Katalognummer (REF)	Lot-Nummer	Anzahl der separierten Produkte (Einheiten)

Name der Einrichtung / der Organisation			
Adresse Ihrer Einrichtung			
Postleitzahl			
Telefonnummer		E-Mail-Adresse	
Name Ihres Lieferanten für dieses Produkt (wenn nicht direkt von BD)			

Geben Sie bitte <u>alle</u> Einrichtungen/ Krankenhäuser an, für die Ihre Antwort gilt <i>(z. B. andere Krankenhäuser innerhalb Ihrer Organisation)</i>	Name der Einrichtung / des Krankenhauses	Postleitzahl

Ihr Name		Berufsbezeichnung:	
Unterschrift		Datum	

Anhang 1: Betroffenes Venovo™ Stent-System - EMEA Katalognummer (REF) und Lot-Nummern

Katalognummer (REF)	Produktname, Schleusengröße, Stentdurchmesser x Länge, Katheterlänge	Eindeutige Geräteerkennung (UDI-DI)	Lot-Nummern
VENEM10040	Venovo 8F 10/40/800mm OUS	00801741101939	ANDU2240, ANDY3304, ANDZ2288, ANDZ3827, ANEP2429, ANEP5328, ANES1042, ANES2208, ANEY3214, ANEY4323, ANFP2666
VENEM10060	Venovo 8F 10/60/800mm OUS	00801741101946	ANDU1102, ANDV1222, ANDV2517, ANDX5352, ANDY2458, ANDY3301, ANDZ1338, ANDZ3819, ANEN1079, ANEN3405, ANEQ4065, ANEQ4961, ANER5167, ANEX0679, ANEX4720, ANEY4324, ANEZ0921, ANEZ2095, ANEZ3410, ANFN3972, ANFP2325
VENEM10080	Venovo 8F 10/80/800mm OUS	00801741101953	ANDU1105, ANDV0287, ANDW4412, ANDX0715, ANDX5308, ANDZ1330, ANDZ2292, ANDZ3826, ANEN1080, ANEQ2730, ANEQ4066, ANES2209, ANET2531, ANEX1699, ANEY3212, ANEY4325, ANEZ0982, ANFP0878, ANFP2364
VENEM10100	Venovo 8F 10/100/800mm OUS	00801741101960	ANDY3305, ANEP0856, ANEP5323, ANEQ2731, ANEQ4067, ANER0516, ANES2210, ANEZ0922, ANFN1442, ANFN3973
VENEM10120	Venovo 8F 10/120/800mm OUS	00801741101977	ANDT1058, ANDU4075, ANDZ1348, ANEN1081, ANEP0857, ANEP3924, ANEQ4068, ANET3794, ANEX0680, ANEZ2096, ANFP2329
VENEM10140	Venovo 8F 10/140/800mm OUS	00801741101984	ANDZ2290, ANEP5324
VENEM10160	Venovo 8F 10/160/800mm OUS	00801741101991	ANDZ2296, ANEP5332, ANFP2330
VENEM12040	Venovo 8F 12/40/800mm OUS	00801741102073	ANDS4772, ANDT0508, ANDW4345, ANDX5315, ANDX5384, ANDY4968, ANDZ2301, ANDZ3817, ANEN4877, ANEP0861, ANEQ2732, ANER5152, ANET0555, ANET3795, ANEW3410, ANEY1223, ANEZ2097, ANEZ3411, ANFN1443, ANFN3974, ANFP0911, ANFP2377
VENEM12060	Venovo 8F 12/60/800mm OUS	00801741102080	ANDS2451, ANDS3973, ANDS4774, ANDT2946, ANDU1877, ANDV0687, ANDW1997, ANDW3561, ANDW4361, ANDX0760, ANDX2782, ANDX3060, ANDX5373, ANDY1234, ANDZ2291, ANDZ3820, ANEN1082, ANEN2140, ANEN4896, ANEP2420, ANEQ1353,

Katalognummer (REF)	Produktname, Schleusengröße, Stentdurchmesser x Länge, Katheterlänge	Eindeutige Geräteerkennung (UDI-DI)	Lot-Nummern
			ANEQ2733, ANEQ4962, ANER0517, ANER1507, ANES1043, ANES2211, ANES4086, ANEZ0923, ANEZ2098, ANEZ3412, ANFN1444, ANFN2844, ANFN3975, ANFP0879, ANFP2317, ANFP2318
VENEM12080	Venovo 8F 12/80/800mm OUS	00801741102097	ANDS0753, ANDT4130, ANDU3110, ANDV0300, ANDV0702, ANDV1233, ANDV2519, ANDW4378, ANDX0727, ANDX2032, ANDX2426, ANDX3063, ANDX5307, ANDY1221, ANDY2464, ANDY3291, ANDZ1331, ANDZ2297, ANDZ3824, ANEN1064, ANEN2145, ANEN3389, ANEN4886, ANEP0860, ANEP3934, ANEQ1354, ANEQ4069, ANER5168, ANES2212, ANEZ0924, ANEZ2099, ANEZ3952, ANFN2787, ANFN3976, ANFP0912, ANFP2336
VENEM12100	Venovo 8F 12/100/800mm OUS	00801741102103	ANDS2461, ANDS3976, ANDS4839, ANDT4131, ANDU1889, ANDW1999, ANDW4395, ANDX0739, ANDX2031, ANDX3062, ANDX5323, ANDX5363, ANDY1231, ANDY3284, ANDY4974, ANDZ3823, ANEN2147, ANEN3398, ANEQ1355, ANEQ2734, ANEQ4963, ANER0475, ANER0518, ANER1508, ANES4087, ANET0556, ANEY2031, ANEZ2100, ANEZ3429, ANFN1445, ANFN3977, ANFP2365
VENEM12120	Venovo 8F 12/120/800mm OUS	00801741102110	ANDU4028, ANDV0275, ANDW4413, ANDX0751, ANDX5301, ANDY4972, ANEN1083, ANEN4883, ANEP5329, ANEQ2735, ANER5120, ANES4088, ANFP0880, ANFP2331
VENEM12140	Venovo 8F 12/140/800mm OUS	00801741102127	ANDU1103, ANDU4040, ANDX5327, ANDX5389, ANDZ1326, ANEP5309, ANEQ1356, ANEQ2736, ANER0519, ANER1535
VENEM12160	Venovo 8F 12/160/800mm OUS	00801741102134	ANDU1104, ANDY2452, ANDY3299, ANDZ3825, ANEN1084, ANEN4894, ANEQ4964, ANER0520
VENEM14040	Venovo 9F 14/40/800mm OUS	00801741102226	ANDS1298, ANDS4185, ANDV4538, ANDW2003, ANDW3567, ANDX0765, ANDX2427, ANDX3065, ANDX5353, ANDY1226, ANDZ2279, ANDZ3828, ANEN1065, ANEN2142, ANEN3391, ANEQ1357, ANEQ2737, ANEQ4070,

Katalognummer (REF)	Produktname, Schleusengröße, Stentdurchmesser x Länge, Katheterlänge	Eindeutige Gerätekenung (UDI-DI)	Lot-Nummern
			ANEQ4965, ANES1029, ANES4089, ANEX1705, ANEY2032, ANEY3213, ANEZ0985, ANEZ3425, ANFN1494, ANFN2845, ANFP0913, ANFP2378, ANFQ2056
VENEM14060	Venovo 9F 14/60/800mm OUS	00801741102233	ANDS1311, ANDS4773, ANDS4840, ANDV0709, ANDW3559, ANDX0711, ANDX2029, ANDX3059, ANDX5372, ANDY1218, ANDY4958, ANDZ1324, ANDZ2275, ANDZ3838, ANEN3392, ANEN4876, ANEP0871, ANEP2432, ANEP3925, ANEQ0218, ANEQ1358, ANEQ2738, ANEQ4753, ANEQ4966, ANER0528, ANES1044, ANES2213, ANEZ0925, ANEZ2101, ANEZ3413, ANEZ3932, ANFN1446, ANFN2788, ANFN3978, ANFP0881, ANFP2354, ANFQ2082, ANFQ2925
VENEM14080	Venovo 9F 14/80/800mm OUS	00801741102240	ANDS2470, ANDS3974, ANDS4775, ANDT1680, ANDU3123, ANDV3568, ANDV4535, ANDW1478, ANDW3563, ANDX1479, ANDX3061, ANDY1237, ANDY2449, ANDY3282, ANDZ1325, ANDZ2282, ANDZ3821, ANEN1062, ANEN3390, ANEN4871, ANEP2434, ANEQ0215, ANEQ1359, ANEQ4967, ANER0521, ANER1509, ANES1045, ANES2214, ANES4090, ANEW3418, ANEZ0926, ANEZ2102, ANEZ3414, ANEZ3933, ANFN2789, ANFN3979, ANFN3980, ANFP2366, ANFQ1012
VENEM14100	Venovo 9F 14/100/800mm OUS	00801741102257	ANDS0754, ANDS3977, ANDS4778, ANDT1681, ANDV0706, ANDV4537, ANDW2000, ANDW3565, ANDW4347, ANDX0723, ANDX2033, ANDX3064, ANDX5300, ANDX5382, ANDY1212, ANDY4957, ANDZ1329, ANDZ2284, ANDZ3837, ANEN2136, ANEN3400, ANEN4879, ANEP0870, ANEP2426, ANEQ1360, ANEQ2739, ANEQ4968, ANER0529, ANER1536, ANES1030, ANET0557, ANEY2033, ANEZ0927, ANEZ2103, ANEZ3415, ANEZ3934, ANFN1447, ANFN2790, ANFN3981, ANFP0882, ANFP2355
VENEM14120	Venovo 9F 14/120/800mm OUS	00801741102264	ANDS2482, ANDT4128, ANDU1113, ANDW4362, ANDX0716, ANDX3058, ANDX5314, ANDY1213, ANDY2460, ANDZ1323, ANDZ2281, ANDZ3816,

Katalognummer (REF)	Produktname, Schleusengröße, Stentdurchmesser x Länge, Katheterlänge	Eindeutige Geräteerkennung (UDI-DI)	Lot-Nummern
			ANEN2149, ANEN4884, ANEP2415, ANEQ1361, ANEQ2740, ANEQ4071, ANER1534, ANES2215, ANEZ0928, ANEZ3416, ANFN2791, ANFN3982, ANFP2379
VENEM14140	Venovo 9F14/140/800mm OUS	00801741102271	ANDS2452, ANDS3975, ANDS4777, ANDT4129, ANDW4379, ANDX5322, ANDX5383, ANDZ1354, ANDZ3822, ANEN2155, ANEP0872, ANEQ2741, ANEQ4072, ANER0522, ANES2216, ANET0558, ANEZ3428, ANFP2332, ANFQ2057
VENEM14160	Venovo 9F 14/160/800mm OUS	00801741102288	ANDU1107, ANDU1900, ANDU3137, ANDW4396, ANDY2461, ANDY3277, ANDY4969, ANDZ1321, ANEP0853, ANEP5311, ANEQ1362, ANEQ2742, ANER0523, ANER2794, ANES4091, ANET3796, ANEZ2104, ANEZ3423, ANFP2333
VENEM16040	Venovo 10F 16/40/800mm OUS	00801741102363	ANDS3980, ANDV0265, ANDV2520, ANDW4415, ANDX5306, ANDY2465, ANDY3303, ANDZ1339, ANDZ3832, ANEN3393, ANEP2433, ANEQ1363, ANEQ2743, ANEQ4969, ANES1031, ANEW3409, ANEX0752, ANEX6159, ANEZ0929, ANEZ3417, ANFN2849, ANFP0883, ANFP2367, ANFQ2058
VENEM16060	Venovo 10F 16/60/800mm OUS	00801741102370	ANDS1325, ANDS3979, ANDS4783, ANDT1684, ANDT2944, ANDV0252, ANDV0708, ANDV1247, ANDV1984, ANDV2513, ANDW4348, ANDX0755, ANDX2037, ANDX2423, ANDX3070, ANDX5326, ANDX5388, ANDY1215, ANDZ1355, ANDZ3831, ANEN1066, ANEN2135, ANEN4887, ANEP2422, ANEP3928, ANEQ1364, ANEQ2744, ANER1539, ANES1046, ANES2217, ANES4092, ANEW3411, ANEX0751, ANEZ0930, ANEZ2105, ANEZ3418, ANFN1448, ANFN2792, ANFN3983, ANFP0884, ANFP2356, ANFP3400, ANFP4500
VENEM16080	Venovo 10F 16/80/800mm OUS	00801741102387	ANDS0760, ANDS1272, ANDS3981, ANDS4784, ANDT1685, ANDV0694, ANDV3571, ANDV4540, ANDW1485, ANDW2016, ANDW3579, ANDW4364, ANDX0707, ANDX2041, ANDX2424, ANDX3074, ANDX5318, ANDY1224,

Katalognummer (REF)	Produktname, Schleusengröße, Stentdurchmesser x Länge, Katheterlänge	Eindeutige Geräteerkennung (UDI-DI)	Lot-Nummern
			ANDZ1341, ANDZ2289, ANDZ3833, ANEN1067, ANEN2137, ANEN4874, ANEP0869, ANEP2431, ANEP3940, ANEQ1365, ANEQ2745, ANER1542, ANES1032, ANES4093, ANEV3070, ANEW2004, ANEW3377, ANEX6015, ANEZ0931, ANEZ3419, ANEZ3937, ANFN1495, ANFN2793, ANFN3984, ANFP0885, ANFP2339, ANFP3403
VENEM16100	Venovo 10F 16/100/800mm OUS	00801741102394	ANDU1855, ANDU3138, ANDV4530, ANDW4381, ANDX0735, ANDX3067, ANDX5325, ANDX5386, ANDY3294, ANDZ1334, ANDZ3830, ANEN1061, ANEN3388, ANEN4882, ANEP2416, ANEP3926, ANEQ1366, ANEQ2746, ANES1047, ANEZ3433, ANEZ3938, ANFN2847, ANFP0886, ANFP2380, ANFP4501
VENEM16120	Venovo 10F 16/120/800mm OUS	00801741102400	ANDV0713, ANDW1481, ANDW2008, ANDX0747, ANDX5365, ANDY2453, ANDY3279, ANEN3383, ANEN4885, ANEQ1367, ANEQ2747, ANEQ4073, ANEQ4970, ANER1525, ANES2218, ANES4094, ANET0559, ANEX3089, ANEY4326, ANEZ0983, ANEZ3420, ANFN1449, ANFN3985, ANFP0887, ANFP2334, ANFP3397
VENEM16140	Venovo 10F 16/140/800mm OUS	00801741102417	ANDS2462, ANDS4841, ANDX2786, ANDX5371, ANDZ3836, ANEN4891, ANEP3913, ANEP5312, ANEQ1374, ANER1547, ANFQ1013
VENEM16160	Venovo 10F 16/160/800mm OUS	00801741102424	ANDU4050, ANDV0695, ANDV1258, ANDX0728, ANDX5366, ANDY2454, ANDY3300, ANEN1068, ANEN4878, ANEP0858, ANEP2410, ANEP3915, ANEP5313, ANEQ4971, ANER0524, ANER1510, ANES2219, ANES4095, ANFN1450, ANFQ1014
VENEM18040	Venovo 10F 18/40/800mm OUS	00801741102509	ANDT1056, ANDW4398, ANDX5360, ANDZ1349, ANDZ2302, ANEN4890, ANEP3917, ANEP5321, ANEQ4074, ANER1526, ANEW4261, ANEZ3421, ANFP3414
VENEM18060	Venovo 10F 18/60/800mm OUS	00801741102516	ANDS4787, ANDU4073, ANDV0700, ANDV1211, ANDV2136, ANDV2518, ANDX0761, ANDX5350, ANDZ1351, ANDZ2280, ANEN2143, ANEN3394,

Katalognummer (REF)	Produktname, Schleusengröße, Stentdurchmesser x Länge, Katheterlänge	Eindeutige Geräteerkennung (UDI-DI)	Lot-Nummern
			ANEN4875, ANEP2411, ANEQ1368, ANEQ2748, ANEQ4972, ANER1546, ANES1033, ANEZ0984, ANFN1451, ANFN3986, ANFP0888, ANFP0889, ANFP2335, ANFP3413
VENEM18080	Venovo 10F 18/80/800mm OUS	00801741102523	ANDS2471, ANDS4781, ANDV0696, ANDW1483, ANDW2011, ANDW4416, ANDX0719, ANDX3068, ANDX5328, ANDX5368, ANDY1233, ANDZ1356, ANEN2138, ANEP2425, ANEP3916, ANEQ1369, ANEQ2749, ANEQ4973, ANER0525, ANER1538, ANES1048, ANES2220, ANET0560, ANEZ0932, ANEZ2106, ANEZ3422, ANFN1452, ANFN3987, ANFP0890, ANFP2342
VENEM18100	Venovo 10F 18/100/800mm OUS	00801741102530	ANDU4076, ANDW1479, ANDW2006, ANDX0712, ANDX2785, ANDX5364, ANDY1232, ANDZ2299, ANEN2154, ANEN3381, ANEP2437, ANEP3914, ANEP5316, ANEQ1370, ANEQ2750, ANER0476, ANER0526, ANER1511, ANES1049, ANES4096, ANFP3415, ANFQ1015
VENEM18120	Venovo 10F 18/120/800mm OUS	00801741102547	ANDW2022, ANDW4350, ANDY3278, ANEN1069, ANEN3401, ANEP2419, ANFP2343
VENEM18140	Venovo 10F 18/140/800mm OUS	00801741102554	ANDW2025, ANDX0740, ANDY2466, ANDY3281, ANEN1085, ANEP0873, ANEP5314, ANEQ1371, ANEQ2751, ANEQ4974, ANER0527, ANER1512, ANES4097
VENEM18160	Venovo 10F 18/160/800mm OUS	00801741102561	ANDX0752, ANDX5380, ANDY3307, ANEN4889, ANEQ4075, ANFN1453
VENEM20040	Venovo 10F 20/40/800mm OUS	00801741102998	ANDV0697, ANDY2451, ANDY4970, ANDZ1344, ANEP3921, ANEQ4076, ANEQ4975, ANER0507, ANES4098, ANEZ0933, ANFP0914, ANFP4502
VENEM20060	Venovo 10F 20/60/800mm OUS	00801741103001	ANDV4532, ANDW2026, ANDX0766, ANDX2783, ANDX5370, ANDZ1350, ANDZ2303, ANEN3384, ANEP2440, ANEP3918, ANEP5330, ANEQ1372, ANEQ2752, ANEQ4976, ANER0508, ANER0509, ANES4099, ANFP3412, ANFP4503

Katalognummer (REF)	Produktname, Schleusengröße, Stentdurchmesser x Länge, Katheterlänge	Eindeutige Geräteerkennung (UDI-DI)	Lot-Nummern
VENEM20080	Venovo 10F 20/80/800mm OUS	00801741103018	ANDV4527, ANDW4366, ANDX0724, ANDX5351, ANDY2468, ANDY3292, ANDZ1333, ANDZ2277, ANEP2439, ANEP3933, ANEQ1373, ANEQ2753, ANEQ4077, ANEQ4977, ANER0506, ANER1513, ANES4100, ANFP2344
VENEM20100	Venovo 10F 20/100/800mm OUS	00801741103025	ANDW1490, ANDW2027, ANDY2455, ANDY3285, ANEP0874, ANEP5310, ANER1527, ANES4101, ANET2532, ANEU0743
VENEM20120	Venovo 10F 20/120/800mm OUS	00801741103032	ANDW2024, ANDZ2294, ANEP0876, ANEP5331, ANES2221
VENEM20140	Venovo 10F 20/140/800mm OUS	00801741103049	ANDU4029, ANDY2450, ANDY3296, ANEN3399, ANEN4870, ANEP2438, ANFP2345, VENEM20160
VENEM20160	Venovo 10F 20/160/800mm OUS	00801741103056	ANDV0253, ANDW2005, ANEP0875, ANEP5315, ANEQ2754, ANES2222, ANFN3988
VENEL10040	Venovo 8F 10/40/1200mm OUS	00801741102004	ANDU2239, ANDW4406, ANDX5374, ANEP3938, ANEQ2716, ANES2187
VENEL10060	Venovo 8F 10/60/1200mm OUS	00801741104664	ANDT1057, ANDU4074, ANDW4338, ANDX5309, ANDZ2308, ANEP0852, ANEP3936, ANEQ4036, ANEQ4945, ANER5149, ANET3785, ANEX0671, ANEX3092, ANEZ0906, ANEZ3430, ANFN1430, ANFP2368
VENEL10080	Venovo 8F 10/80/1200mm OUS	00801741104671	ANDU4027, ANDV4526, ANDW4339, ANDX5324, ANDX5385, ANDZ3818, ANEN1086, ANEQ2717, ANEQ4037, ANEQ4946, ANER5165, ANET2530, ANEU0741, ANEU3303, ANEX0749, ANEZ0907, ANFN3944, ANFP2369
VENEL10100	Venovo 8F 10/100/1200mm OUS	00801741102035	ANDT0505, ANDT1054, ANDY2469, ANDY4963, ANDZ1345, ANEP0862, ANEP2417, ANEW2047, ANEW4217, ANEY3209, ANEY4322, ANFN1431, ANFN3945, ANFP2370
VENEL10120	Venovo 8F 10/120/1200mm OUS	00801741102042	ANEQ1347, ANES2188, ANFP2349
VENEL10140	Venovo 8F 10/140/1200mm OUS	00801741102059	ANDU1108, ANDY3280, ANEN3385, ANEQ1348, ANEQ4038

Katalognummer (REF)	Produktname, Schleusengröße, Stentdurchmesser x Länge, Katheterlänge	Eindeutige Geräteerkennung (UDI-DI)	Lot-Nummern
VENEL10160	Venovo 8F10/160/1200mm OUS	00801741102066	ANDS1027, ANDW1996, ANDX6354, ANDY2448, ANET1855
VENEL12040	Venovo 8F 12/40/1200mm OUS	00801741102141	ANDT0506, ANDT1055, ANDU2242, ANDU4039, ANDW1998, ANDX1402, ANDY3289, ANDY4964, ANDZ2307, ANEN2153, ANEP2424, ANES2189, ANET0542, ANEW3366, ANEW4218, ANEX1697, ANEX6010, ANEZ0908, ANEZ2081, ANEZ3398, ANFN3946, ANFP0857, ANFP2319
VENEL12060	Venovo 8F 12/60/1200mm OUS	00801741102158	ANDS0752, ANDT0507, ANDT1059, ANDV4534, ANDX1401, ANDX2425, ANDX3057, ANDX5362, ANDY1230, ANDZ1322, ANDZ2286, ANEN4897, ANEP0867, ANEP2421, ANEP3930, ANEQ2718, ANEQ4039, ANER1514, ANES2190, ANES4062, ANEV1711, ANEW3367, ANEW4219, ANEX0746, ANEX1708, ANEX3091, ANEX6018, ANEY1228, ANEZ2082, ANFN1432, ANFN3947, ANFP0858, ANFP2358, ANFP4499
VENEL12080	Venovo 8F 12/80/1200mm OUS	00801741102172	ANDV3567, ANDV4528, ANDX1374, ANDX1405, ANDX2034, ANDY1238, ANDY4960, ANDZ1332, ANDZ2304, ANEN1070, ANEN3402, ANEP3939, ANEP5317, ANEQ2719, ANEQ4040, ANER5118, ANES2191, ANET0543, ANET3786, ANEW4260, ANEX3093, ANEX6157, ANEY1221, ANEY2034, ANEY3210, ANEZ3431, ANFN2783, ANFN3948, ANFP0859, ANFP2359
VENEL12100	Venovo 8F 12/100/1200mm OUS	00801741102189	ANDU2243, ANDV1244, ANDW4355, ANDX1406, ANDX2035, ANDX5316, ANDX5390, ANDY3308, ANDZ2283, ANEN1071, ANEN4895, ANEP2435, ANEQ2720, ANEQ4041, ANEQ4947, ANER1515, ANES4063, ANET3787, ANEW3412, ANEX0672, ANEX3081, ANEX6011, ANEY3211, ANEZ3399, ANFN1433, ANFN3949, ANFP0908, ANFP2360, ANFP3394
VENEL12120	Venovo 8F 12/120/1200mm OUS	00801741102196	ANDS0751, ANDS4788, ANDS4823, ANDU2244, ANDV4533, ANDW4372, ANDX1373, ANDX3056, ANDX5361, ANDY1229, ANDY2456, ANDY3283, ANDY4965, ANDZ1327, ANDZ2287, ANEN2150, ANEN4880, ANEP0877,

Katalognummer (REF)	Produktname, Schleusengröße, Stentdurchmesser x Länge, Katheterlänge	Eindeutige Geräteerkennung (UDI-DI)	Lot-Nummern
			ANEQ4042, ANER1516, ANEW4220, ANEX1707, ANFN1434, ANFN2784, ANFN3950, ANFN3951, ANFP2361
VENEL12140	Venovo 8F 12/140/1200mm OUS	00801741102202	ANDS1282, ANDU2245, ANDW2002, ANDW4389, ANDX5376, ANDY3288, ANEN1072, ANEN3387, ANEP2430, ANEQ4043, ANER1517, ANES4064, ANFN3952, ANFN3953, ANFP0860
VENEL12160	Venovo 8F 12/160/1200mm OUS	00801741102219	ANDS4776, ANDT1686, ANDV4536, ANDX1403, ANDX5375, ANDY3287, ANEP2412, ANEQ4948, ANES4065, ANEZ3427, ANFN3954, ANFP0861
VENEL14040	Venovo 9F 14/40/1200mm OUS	00801741102295	ANDS0902, ANDS1029, ANDS4184, ANDT2943, ANDU1106, ANDV0250, ANDV1245, ANDV2515, ANDW2001, ANDW4407, ANDX1404, ANDX6356, ANDY4962, ANEP3937, ANEQ4044, ANEQ4949, ANER0505, ANES1035, ANES4066, ANET1856, ANET1857, ANEW3368, ANEW4221, ANEX6012, ANEZ0909, ANEZ2083, ANEZ3424, ANFN1435, ANFN2785, ANFP0862, ANFP2362, ANFP3393
VENEL14060	Venovo 9F 14/60/1200mm OUS	00801741102301	ANDS0757, ANDS1269, ANDS2479, ANDS4824, ANDT2945, ANDU2246, ANDV0251, ANDV0690, ANDV1256, ANDX0759, ANDX2039, ANDX3072, ANDX5305, ANDY1220, ANEN1073, ANEN2152, ANEP0854, ANEP3569, ANEP3931, ANES2192, ANES4067, ANET0544, ANEU4252, ANEW2002, ANEW3369, ANEW4222, ANEX0673, ANEX1702, ANEX3082, ANEX4716, ANEX6023, ANEY1224, ANEZ0910, ANEZ2084, ANEZ3400, ANFN3955, ANFP0863, ANFP2320, ANFP3402
VENEL14080	Venovo 9F 14/80/1200mm OUS	00801741102318	ANDS0756, ANDS1283, ANDS4825, ANDW4341, ANDX1380, ANDX1412, ANDX2038, ANDX3071, ANDX5311, ANDY1222, ANDY2462, ANDY4973, ANDZ1352, ANDZ3839, ANEN2144, ANEN3396, ANEP3935, ANEP5326, ANEQ4045, ANEQ4950, ANER1540, ANES2193, ANES4068, ANET0545, ANET3788, ANEW2046, ANEW3416, ANEX0674, ANEX1700, ANEX3083, ANEX6022, ANEY1225, ANEY4328, ANEZ0911, ANEZ2085, ANEZ3401,

Katalognummer (REF)	Produktname, Schleusengröße, Stentdurchmesser x Länge, Katheterlänge	Eindeutige Geräteerkennung (UDI-DI)	Lot-Nummern
			ANEZ3957, ANFN2848, ANFN3956, ANFP0864, ANFP1519, ANFP2315, ANFP2316
VENEL14100	Venovo 9F 14/100/1200mm OUS	00801741102325	ANDS1296, ANDS4826, ANDT1683, ANDV0711, ANDV1209, ANDV3569, ANDW1480, ANDX1408, ANDX2036, ANDX5302, ANDY3309, ANDZ1342, ANDZ2276, ANDZ3829, ANEN1074, ANEN4899, ANEP0866, ANEP3927, ANEP5325, ANEQ4046, ANEQ4951, ANER1537, ANES2194, ANES4069, ANET0546, ANET3789, ANEV1712, ANEW2003, ANEW3370, ANEW4223, ANEX0747, ANEX1709, ANEX3094, ANEX6019, ANEZ0912, ANEZ2086, ANEZ3402, ANEZ3956, ANFN2846, ANFN3957, ANFP0865, ANFP2340, ANFP3395
VENEL14120	Venovo 9F 14/120/1200mm OUS	00801741102332	ANDS1310, ANDS4827, ANDV0698, ANDV3572, ANDV4541, ANDW1486, ANDX1382, ANDX1416, ANDX3075, ANDX5319, ANDY1225, ANDY3298, ANDZ2278, ANDZ3834, ANEN1075, ANEP0878, ANEP2428, ANEP3932, ANEQ2721, ANEQ4047, ANEQ4952, ANER1543, ANES2195, ANES4070, ANET0547, ANEW3421, ANEX0754, ANEZ0913, ANEZ2087, ANEZ3403, ANFN2850, ANFN3958, ANFN3959, ANFP0866, ANFP2337, ANFP3405
VENEL14140	Venovo 9F 14/140/1200mm OUS	00801741102349	ANDU2247, ANDU3135, ANDV0710, ANDV2510, ANDV3575, ANDW4356, ANDX1372, ANDX1386, ANDX3079, ANDY1219, ANDY2463, ANDY4971, ANDZ3835, ANEN3397, ANEP3919, ANEQ2722, ANEQ4048, ANEQ4953, ANES2196, ANET0548, ANEX1704, ANEY1222, ANEY2035, ANEZ2088, ANEZ3438, ANFN3960, ANFN3961, ANFP0867, ANFP2363, ANFP3410
VENEL14160	Venovo 9F 14/160/1200mm OUS	00801741102356	ANDS0761, ANDS3982, ANDS4785, ANDS4828, ANDU2248, ANDU3096, ANDV0298, ANDV1221, ANDV2511, ANDW1487, ANDX1418, ANDX2042, ANDX3077, ANDX5320, ANDY1216, ANEN2139, ANEP0868, ANEQ0214, ANEQ1349, ANER1545, ANES4071, ANEZ0914, ANEZ2089, ANEZ3437,

Katalognummer (REF)	Produktname, Schleusengröße, Stentdurchmesser x Länge, Katheterlänge	Eindeutige Gerätekenung (UDI-DI)	Lot-Nummern
			ANFN3962, ANFP0868, ANFP2341, ANFP3407
VENEL16040	Venovo 10F 16/40/1200mm OUS	00801741102431	ANDS4829, ANDU1854, ANDU3109, ANDX5303, ANDY3290, ANDY4966, ANEN1076, ANEN3916, ANEP3923, ANEQ2723, ANEQ4049, ANEQ4954, ANER5134, ANES4072, ANEW4224, ANEX3084, ANEX6013, ANEY2036, ANEZ3432, ANFP0909, ANFP2371
VENEL16060	Venovo 10F 16/60/1200mm OUS	00801741102448	ANDS4830, ANDT1060, ANDT1682, ANDU3122, ANDU4071, ANDV0703, ANDW4373, ANDX1375, ANDX1407, ANDX2422, ANDX3066, ANDX5321, ANDY1227, ANDZ1336, ANDZ2305, ANEN1077, ANEN2141, ANEN4898, ANEP0855, ANEP2413, ANEQ4050, ANEQ4955, ANER0473, ANER1518, ANES2197, ANES4073, ANET0549, ANEW4225, ANEX0675, ANEX1701, ANEX3085, ANEY2028, ANEZ0915, ANEZ2090, ANEZ3404, ANFN1436, ANFN2786, ANFP0869, ANFP2326
VENEL16080	Venovo 10F 16/80/1200mm OUS	00801741102455	ANDU1111, ANDU3136, ANDV0286, ANDV0707, ANDV2514, ANDW4390, ANDX1417, ANDX2784, ANDX3076, ANDX5379, ANDY1235, ANDY2457, ANDY4959, ANDZ1346, ANDZ2285, ANDZ3840, ANEN3403, ANEN4900, ANEP0864, ANEP3566, ANEP3941, ANEQ4051, ANEQ4956, ANER1544, ANES2198, ANES4074, ANET0550, ANET3790, ANEW3371, ANEW4226, ANEX0676, ANEX3086, ANEX4717, ANEX6014, ANEY1226, ANEY4327, ANEZ3405, ANFN1437, ANFN3963, ANFP0870, ANFP2338
VENEL16100	Venovo 10F 16/100/1200mm OUS	00801741102462	ANDS1323, ANDS2480, ANDS4831, ANDT1229, ANDV0691, ANDX0750, ANDX1387, ANDX1422, ANDX2043, ANDX3080, ANDX5329, ANDX5359, ANDY1217, ANDY4975, ANDZ1353, ANEN4892, ANEP2427, ANEQ2724, ANEQ4052, ANEQ4957, ANER1519, ANES2199, ANES4075, ANET0551, ANEX1706, ANEX3087, ANEX6024, ANEY1227, ANEY4329, ANEZ3406, ANFN1438, ANFN2851, ANFN3964, ANFP0871, ANFP2327

Katalognummer (REF)	Produktname, Schleusengröße, Stentdurchmesser x Länge, Katheterlänge	Eindeutige Geräteerkennung (UDI-DI)	Lot-Nummern
VENEL16120	Venovo 10F 16/120/1200mm OUS	00801741102479	ANDS0759, ANDS4832, ANDT2447, ANDV0263, ANDV0712, ANDV1232, ANDV2516, ANDW4409, ANDX1381, ANDX1415, ANDX2040, ANDX3073, ANDX5312, ANDY1223, ANDY4961, ANEN1063, ANEN4881, ANEP0865, ANEP2414, ANEQ1350, ANEQ2725, ANEQ4053, ANEQ4958, ANER1541, ANES2200, ANES4076, ANET0552, ANEW3420, ANEX0753, ANEX1711, ANEZ2091, ANEZ3407, ANFN3965, ANFP0872, ANFP2348
VENEL16140	Venovo 10F 16/140/1200mm OUS	00801741102486	ANDS1270, ANDS4833, ANDT2448, ANDU3083, ANDV1246, ANDX1379, ANDX2030, ANDX3069, ANDX5354, ANDY1214, ANEN3404, ANEP2436, ANEQ4054, ANES2201, ANEW3415, ANFN3966, ANFP0873, ANFP2350
VENEL16160	Venovo 10F 16/160/1200mm OUS	00801741102493	ANDS1284, ANDS2450, ANDS4786, ANDS4834, ANDT4133, ANDV0688, ANDV3574, ANDV4544, ANDW1488, ANDX0764, ANDX1370, ANDX1385, ANDX1421, ANDX5358, ANDY1228, ANEQ4055, ANES2202, ANEX0677, ANEZ0916, ANEZ2092, ANEZ3408, ANFN3967, ANFP2372, ANFP3409
VENEL18040	Venovo 10F 18/40/1200mm OUS	00801741102578	ANDS1297, ANDS4835, ANDX1414, ANDX5356, ANDZ1340, ANEN1078, ANEN4872, ANEP5320, ANEQ2726, ANEQ4056, ANES2203, ANEU0742, ANEW3372, ANEX4718, ANEZ0917, ANFN3968, ANFP2351
VENEL18060	Venovo 10F 18/60/1200mm OUS	00801741102585	ANDS0755, ANDS4780, ANDT1230, ANDU3097, ANDV0264, ANDV0704, ANDV2512, ANDV4539, ANDW4342, ANDX1377, ANDX1409, ANDX5367, ANDY3297, ANDZ1337, ANEN2148, ANEN4893, ANEQ1351, ANEQ4057, ANEQ4959, ANES1036, ANES2204, ANET3791, ANEU3304, ANEW3419, ANEX3088, ANEX6158, ANEY2029, ANEZ3434, ANFP0874, ANFP2373
VENEL18080	Venovo 10F 18/80/1200mm OUS	00801741102592	ANDS1308, ANDS4836, ANDV0299, ANDV0701, ANDV3573, ANDV4542, ANDW4358, ANDX1384, ANDX1420, ANDX3078, ANDX5381, ANDY1236, ANDZ1347, ANDZ2293, ANEN2146, ANEN4873, ANEP2423, ANEQ4058,

Katalognummer (REF)	Produktname, Schleusengröße, Stentdurchmesser x Länge, Katheterlänge	Eindeutige Geräteerkennung (UDI-DI)	Lot-Nummern
			ANER1520, ANER5166, ANES2205, ANES4077, ANET0553, ANEV1713, ANEW3373, ANEW4227, ANEX0748, ANEX3097, ANEX6016, ANFP0875, ANFP2328
VENEL18100	Venovo 10F 18/100/1200mm OUS	00801741102608	ANDU1109, ANDV0692, ANDV3570, ANDW4375, ANDX1378, ANDX5304, ANDX5387, ANEN2151, ANEN3380, ANEN4888, ANEP3920, ANEQ4059, ANER4198, ANES1037, ANES4078, ANET3792, ANEW2045, ANEW3414, ANEX6021, ANFN1439, ANFP0876, ANFP2374
VENEL18120	Venovo 10F 18/120/1200mm OUS	00801741102967	ANDS2460, ANDS4837, ANDV1257, ANDW4392, ANDX5317, ANDY2467, ANDY3286, ANDZ1328, ANEP5318, ANEQ2727, ANEQ4060, ANES1038, ANES4079, ANET0554, ANEW3413, ANEX6020, ANEZ3435, ANFN3969, ANFP0910, ANFQ1011
VENEL18140	Venovo 10F 18/140/1200mm OUS	00801741102974	ANDS4779, ANDS4838, ANDV0686, ANDW1482, ANDW4410, ANDX1376, ANEP5319, ANEQ2728, ANES2206, ANES4080, ANFN3970, ANFP2352
VENEL18160	Venovo 10F 18/160/1200mm OUS	00801741102981	ANDS3978, ANDS4782, ANDV0705, ANDW1484, ANDW4344, ANDX1410, ANDX5377, ANER5150, ANES4081, ANEX0750, ANEX1710, ANEX3095, ANFN1440, ANFN3971, ANFP2375
VENEL20040	Venovo 10F 20/40/1200mm OUS	00801741103063	ANDS1028, ANDU3353, ANDX5313, ANDX6355, ANDZ1343, ANDZ2300, ANET1858, ANET1859, ANEW3374, ANEX6017, ANEZ3439, ANFP2353
VENEL20060	Venovo 10F 20/60/1200mm OUS	00801741103070	ANDS1324, ANDT2896, ANDU1112, ANDV0699, ANDX1383, ANDX1419, ANDX5369, ANDY4967, ANDZ2295, ANEN3395, ANEP5327, ANEQ1352, ANEQ4061, ANER1521, ANER5119, ANES4082, ANEW3417, ANEX0755, ANEX3096, ANEZ3409, ANFP2321
VENEL20080	Venovo 10F 20/80/1200mm OUS	00801741103087	ANDS0758, ANDT4132, ANDU4060, ANDV0693, ANDV1210, ANDX1413, ANDX5355, ANDY3293, ANDZ2298, ANEN3406, ANEP0859, ANEP3922, ANEQ4062, ANER1522, ANER2793, ANER5135, ANES1039, ANES4083,



Katalognummer (REF)	Produktname, Schleusengröße, Stentdurchmesser x Länge, Katheterlänge	Eindeutige Geräteerkennung (UDI-DI)	Lot-Nummern
			ANET3793, ANEU3274, ANEX1703, ANEX4719, ANEY2030, ANEZ0918, ANEZ2093, ANEZ3426, ANFP2322
VENEL20100	Venovo 10F 20/100/1200mm OUS	00801741103094	ANDS1271, ANDV4531, ANDW4359, ANDX1411, ANDX5310, ANDY2459, ANDY3302, ANDZ2306, ANEN3382, ANEP3929, ANEP5333, ANEQ2729, ANER1523, ANER5151, ANES4084, ANEW3375, ANEZ0919, ANFN1441, ANFP2323, ANFP3398
VENEL20120	Venovo 10F 20/120/1200mm OUS	00801741103100	ANDS1285, ANDT1231, ANDV0689, ANDW4376, ANDX5357, ANDY3306, ANDZ2309, ANEP0851, ANEP5322, ANEQ4063, ANER0474, ANER1524, ANES1040, ANEZ2094, ANEZ3436, ANFP2324
VENEL20140	Venovo 10F 20/140/1200mm OUS	00801741103117	ANDS2469, ANDW4393, ANDX5378, ANES2207
VENEL20160	Venovo 10F 20/160/1200mm OUS	00801741103124	ANDS2481, ANDT1222, ANDU1110, ANDU1866, ANDX1369, ANDY3295, ANDZ1335, ANEN3386, ANEP0863, ANEP2418, ANEQ4064, ANEQ4960, ANES1041, ANES4085, ANEW3376, ANEW4228, ANEX0678, ANEX1698, ANEZ0920, ANFP0877, ANFP2376, ANFP3406

Anhang 2: Bild eines repräsentativen Produktetiketts

VENOVO™ Venous Stent System

BARD | PERIPHERAL VASCULAR

Système de stent veineux • Venöses Stentsystem • Sistema di stent venoso • Sistema de stent venoso • Veneuze stentsysteem • Sistema de Stent Venoso • Σύστημα Φλεβικού Stent • Venöst stentsystem • Venöst stentsystem • Laskimostenttijärjestelmä • Venöst stentsystem • System stentow żylnych • Vénás sztent rendszer • Systém žilního stentu • Venöz Stent Sistemi • 靜脈血管支架系統 • 정맥 스텐트 시스템 • Система венозного стента • Venózný stentový systém • Venoosne stendisüsteem • Veninio stento sistema • Sistem cu stent venos • Венозная стент система • نظام الدعامات الوريدية

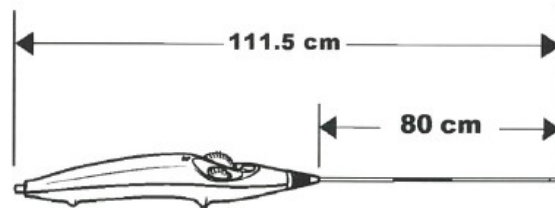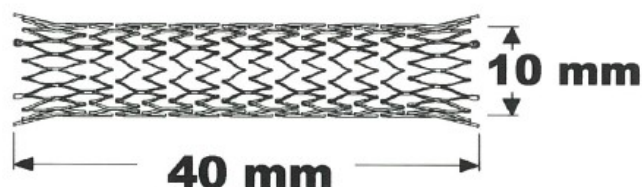

REF VENEM10040
LOT ANUGXXXX

2999-01-01

.035"
(0.89 mm)

8F
(2.67 mm)



Manufacturer:
Angiomed GmbH & Co. Medizintechnik KG
Wachhausstrasse 6
76227 Karlsruhe
Germany
Tel: ++49 721 9445-0
Fax: ++49 721 9445-111
Bard and Venovo are trademarks and/or registered trademarks
of C. R. Bard Inc.
Copyright © 2015 C.R. Bard, Inc. All Rights Reserved.

CE
2797



LOT-Nummer

Katalognummer (REF)

Verfallsdatum

Eindeutige Geräteerkennung
(UDI-DI)